


HandiCalendarin käyttöönotto

Onneksi olkoon uudesta Handi-laitteesta – Näin aloitat sen käytön!

Lisätietoja eri vaiheista löydät *Käsikirjasta*, jonka voit ladata osoitteesta www.abilia.com.

1. Asenna HandiCalendar

1. Avaa laitteessasi *App Store* / *Google Play*.
2. Hae ”HandiCalendar”.
3. Asenna.

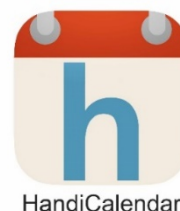

HandiCalendar

2. Kirjaudu sisään myAbilia-käyttäjättilille

Käyttäjättilin voi luoda suoraan osoitteessa myAbilia.com.

Voit nyt käyttää esittelyversiota 60 päivää. Sen jälkeen tarvitset käyttöön lisenssin.



3. Rekisteröi lisenssisi

Lisenssi on rekisteröitävä käyttäjättililtä. Toimi seuraavasti:

1. Kirjaudu käyttäjättilille.
2. Siirry kohtaan Oma profiili ja valitse Lisenssit.
3. Napsauta *Lisää lisenssi*, anna lisenssiavain ja tallenna napsauttamalla *Lisää*.

Lisenssi on nyt päivitetty HandiCalendar-sovelluksessa (jos laite on yhdistetty internetiin).

4. Vinkki: Mukauta HandiCalendar

HandiCalendar voidaan mukauttaa monella tavalla käyttäjän tarpeita vastaavaksi. Vinkkejä saat *mukautusoppaasta*, jonka voi ladata osoitteesta www.abilia.com.

5. Vinkki: Käytä myAbilia-verkkopalvelua

Käynnistä verkkoselain. Avaa www.myabilia.com ja kirjaudu sisään tilitiedoillasi. Voit helposti antaa myAbiliasta tukea HandiCalendarin aktiviteeteilla, kuvilla jne.