



Näin käynnistät MEMOplannerin ensi kertaa

Onnittelut MEMOplannerin hankkimisesta! Näillä ohjeilla pääset alkuun.

Art. nr: 4628XX


1. Kytke muuntaja

Kytke muuntaja MEMOplanneriin ja seinässä olevaan pistorasiaan.

2. Käynnistä MEMOplanner

Paina virtapainiketta ja pidä se pohjassa.

3. Noudata oppaassa annettuja asetusohjeita

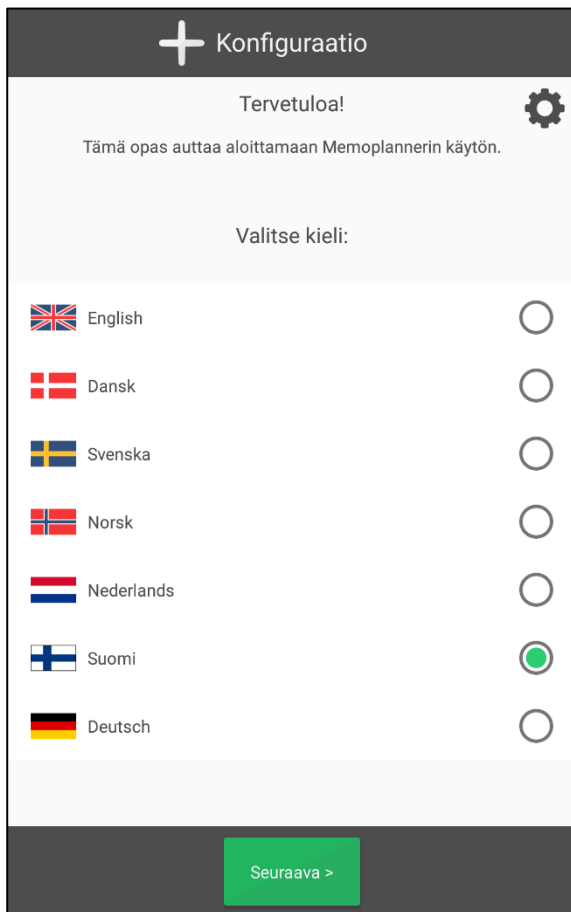


Ohjeissa kerrotaan, miten valitset MEMOplanneriin seuraavat asetukset:

- Kieli *
- Internetyhteys
- Päivitys uusimpaan versioon
- Päivämäärä ja kellonaika
- Puhetuen selostusääni


* Ei koske MEMOplanner Large 3 -laitetta (tuotenumero 462885), MEMOplanner Medium 3b -laitetta (tuotenumero 462875) ja Medium 4 -laitetta (tuotenumero 462890). Voit valita toisen kielen MEMOplannerin käsikirjasta.

4. Kirjaudu myAbilia-tilille

MEMOplannerin käyttöä varten tarvitset myAbilia-tilin.

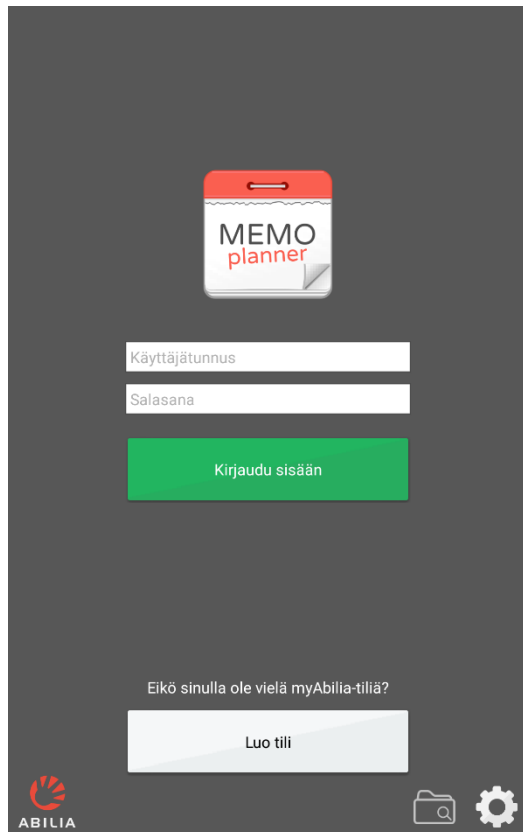

The login screen features a dark grey background. At the top center is a red and white icon of a calendar with the text 'MEMO planner'. Below this are two white input fields: 'Käyttäjätunnus' and 'Salasana'. A green button labeled 'Kirjaudu sisään' is positioned below the fields. At the bottom, there is a link 'Eikö sinulla ole vielä myAbilia-tiliä?' and a button labeled 'Luo tili'. The myABILIA logo is in the bottom left corner, and a folder and gear icon are in the bottom right corner.

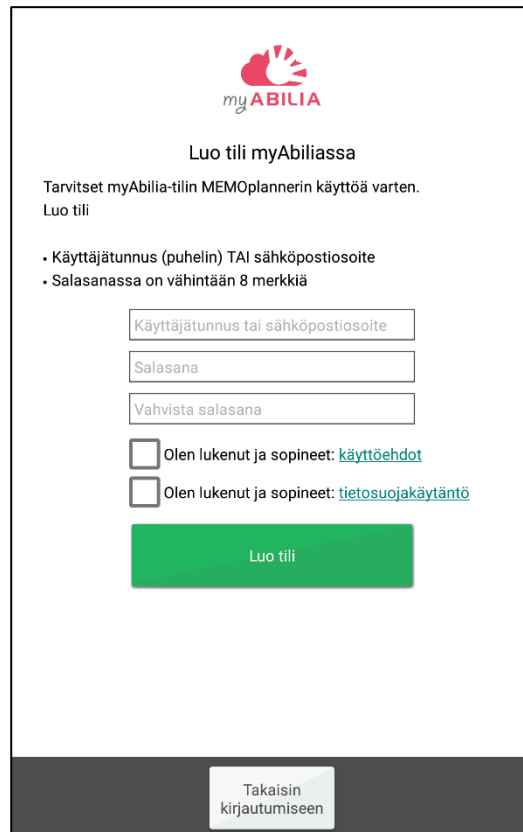

The account creation screen has a white background. At the top is the myABILIA logo. Below it is the heading 'Luo tili myAbiliassa'. The text 'Tarvitset myAbilia-tilin MEMOplannerin käyttöä varten. Luo tili' is displayed. Two bullet points list requirements: 'Käyttäjätunnus (puhelin) TAI sähköpostiosoite' and 'Salasanassa on vähintään 8 merkkiä'. There are three input fields: 'Käyttäjätunnus tai sähköpostiosoite', 'Salasana', and 'Vahvista salasana'. Two checkboxes with links are present: 'Olen lukenut ja sopineet: [käyttöehdot](#)' and 'Olen lukenut ja sopineet: [tietosuojakäytäntö](#)'. A green button labeled 'Luo tili' is at the bottom. A dark grey footer contains a button labeled 'Takaisin kirjautumiseen'.

Onko sinulla jo myAbilia-tili?

Kirjaudu sisään käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Haluatko luoda myAbilia-tilin?

Valitse "Luo tili" ja noudata näytöllä olevia ohjeita.

- Jos valitset käyttäjätunnukseksi sähköpostiosoitteesi, pystyt vaihtamaan unohtuneen salasanan helposti.
- Jos valitset käyttäjätunnukseksi puhelinnumerosi, me Abilialla voimme auttaa sinua unohtuneen salasanan vaihtamisessa.

5. Muista tilisi tiedot

Kirjoita tilisi tiedot tähän, jotta ne eivät pääse unohtumaan.

Säilytä paperi turvallisessa paikassa.

Tilini tiedot MEMOplannerin ja myAbilia-verkkopalvelun käyttöä varten

Käyttäjätunnus: _____

Salasana: _____

6. Valitse aloitussarja

Jos olet uusi myAbilia-käyttäjä, voit valita aloitussarjan (kuva-arkisto, perusaktiviteetit, perusajastimet ja tarkistuslistat).



7. Nyt MEMOplanner on käyttövalmis!



8. MyAbilia-verkkopalvelun etätuki

Avaa verkkoselain tietokoneella, älypuhelimella tai tabletilla. Mene osoitteeseen *myabilia.com* ja kirjaudu myAbilia-tilillesi. Tämän jälkeen voit kutsua apuun tukihenkilöitä. He auttavat sinua MEMOplanneriin liittyvissä ongelmissa (aktiviteetit, kuvat jne.) oman myAbilia-tilinsä kautta.



MEMOplanner ja internetyhteys

MEMOplanner voidaan yhdistää internetiin, minkä ansiosta voit:

- Käyttää myAbilia-verkkopalvelua
- Ladata MEMOplanner-sovelluksen älypuhelimeesi
- Tallettaa tilisi tiedot varotoimenpiteenä pilvipalveluun
- Päivittää MEMOplannerin uusimpaan ohjelmistoversioon



Muista, että jos MEMOplanner siirretään uuteen paikkaan, se on yhdistettävä uudelleen internetiin.

MEMOplanneria voi kuitenkin käyttää myös ilman internetyhteyttä.

Me autamme!

Jos haluat uusimmat käyttöohjeet, skannaa QR-koodi älypuhelimesi kameralla.

