



HandiCalendar

Käsikirja

Art. Nr: 706380

HandiCalendar iOS: versio 2.5 tai uudempi
HandiCalendar Android: versio 2.1 tai uudempi

Sisältö

1. Johdanto	4
1.1 Tuotteen kuvaus	4
1.2 Käyttötarkoitus	4
1.3 Lääkinnällisiä laitteita koskeva vaatimustenmukaisuus	4
1.4 Asiakirjan kuvaus	4
1.5 Tärkeää tietoa	5
1.6 Terminologia	5
1.7 myAbilia	6
1.8 Kuva-arkisto HandiCalendar	6
1.9 Varttikello-periaate	7
1.10 HandiCalendarin puhetuki	7
1.11 HandiCalendarin aktiviteettityypit	8
2. Asennus ja lisensointi	9
2.1 Asennus	9
2.2 Päivitykset	9
2.3 Lisenssin hallinta	9
3. HandiCalendarin käyttöönotto	11
3.1 Kirjautuminen HandiCalendariin	11
3.2 Asenna puhetuki (Android)	11
3.3 Lisää aloitussarja	11
3.4 HandiCalendarin säädöt	11
4. Kalenteritoiminnot	12
4.1 Kalenterinäkymä	12
4.2 Aktiviteettinäkymä	15
4.3 Hälytykset ja muistutukset	18
4.4 Lisää aktiviteetti	19
4.5 Tarkista aktiviteetti valmiiksi	25
4.6 Käynnistä ajastin	26
4.7 Muokkaa aktiviteettia tai ajastin	27
4.8 Poista aktiviteetti tai ajastin	27
4.9 Muokkausnäkymä	28
4.10 Kello	32
4.11 Hae aktiviteetti	32
5. Asetukset-valikko	33
5.1 Koodisuojaus	33
5.2 Kalenterinäkymä	33
5.3 Aktiviteettinäkymä	34
5.4 Lisää aktiviteetti	35
5.5 Muokkausnäkymä	36
5.6 Tietovalikko	36
5.7 Kalenterivalikko	36
5.8 Ajan näyttö	37
5.9 Aikasyöte (Android)	38
5.10 Kellonäkymä	38
5.11 Kuukausinäkymä	39
5.12 Viikkonäkymä	39

5.13 Käynnistä ajastin	39
5.14 Perusaktiviteetit	40
5.15 Perusajastimet	40
5.16 Katteoria	40
5.17 Hälytysääni	41
5.18 Hälytysnäkyä (Android)	41
5.19 Synteettinen puhe	42
5.20 Lokit (Android)	42
5.21 Tietoja HandiCalendarista (Android)	42
5.22 Kirjautu ulos	42
6 HandiCalendar Apple Watch (iOS) -älykellossa	43
6.1 Toiminnot	43
6.2 Apple Watchin hälytykset	43
6.3 Asennus	43
7. Oletusasetukset	44
8 Tekninen informaatio	47
8.1 Mukana tulevat osat	47
8.2 Tekniset tiedot	47

1. Johdanto

1.1 Tuotteen kuvaus

HandiCalendar on aikahallinnan ja suunnittelun apu älypuhelimessa. Sovellus on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat edistynyttä aikatukea helppokäyttöisessä kalenterissa.

Käyttämällä HandiCalendaria voit:

- käyttää kuvia, jotka tekevät kalenterista entistä selkeämmän
- nähdä laskurin aktiviteettien alkamiseen tai päättymiseen pisteinä
- kuulla tekstin ääneen luettuna puhesynteesin avulla
- saada selkeitä hälytyksiä aktiviteettien alkamisesta ja päättymisestä
- lisätä helpommin aktiviteetteja
- käyttää esimääritettyjä aktiviteetteja ja ajastimia
- käyttää tarkistettavia aktiviteetteja paremman muistituen ja muistutusten saamiseen

1.2 Käyttötarkoitus

HandiCalendar on digitaalinen kalenteri, joka on tarkoitettu ihmisille, jotka tarvitsevat erityistä tukea ajallisesti ja suunnittelun lisäksi graafista selkeyttä. HandiCalendar voidaan käyttää Android- ja iOS-laitteilla, sekä sisällä että ulkona.

1.3 Lääkinnällisiä laitteita koskeva vaatimustenmukaisuus

HandiCalendar markkinoidaan teknisenä apuvälineenä toimintarajoitteisille ihmisille, ja se täyttää kaikki lääkinällisille laitteille asetetut vaatimukset, määräykset ja direktiivit.

1.4 Asiakirjan kuvaus

Tässä käsikirjassa kuvataan *HandiCalendar for iOS* ja *HandiCalendar for Android*, jotka ovat kaksi erillistä sovellusta.

- Kahden sovelluksen toiminnot ovat pääosin samanlaiset, ja eroavuudet on ilmoitettu selkeästi.
- Nämä kaksi sovellusta näyttävät lähes samanlaisilta kalenteritoimintojen osalta, mutta niiden muokkaus- ja asetustoiminnoissa on eroja.
- Kaikissa tämän asiakirjan kuvissa on *HandiCalendar for Android* -sovellus.

Tässä oppaassa näytetään miten HandiCalendarin asennus ja käyttöönotto tapahtuu. Se sisältää myös tarkan kuvauksen HandiCalendarin periaatteista, toiminnoista ja asetuksista.

Tämä käyttöohje on tarkoitettu tukihenkilöille.

Lisädokumentaatiota, esimerkiksi **Pikaoppaan** ja **mukautusoppaan**, voi ladata osoitteesta www.abilia.com. Pääset helposti oppaisiin takasivun QR-koodilla.

1.5 Tärkeää tietoa

1.5.1 Turvallisuusmääritelmät



VAROITUS: Loukkaantumis- tai hengenvaara, jos annettuja ohjeita ei noudateta.



VAROVAISUUTTA: Tuotteen vaurioitumisen vaara, jos ohjeita ei noudateta.

HUOMAA: Tiedot, jotka tarvitaan määrätysssä tilanteessa.

VINKKI: Lisätietoja, jotka voivat parantaa tuotteen käyttöä.

1.5.2 Käyttöä koskevat turvallisuusohjeet



VAROITUS: Lue seuraavat varoitusohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa.

- Lue ja ymmärrä tämän käyttöohjeen sisältö ennen tuotteen käyttöä.
- Älä käytä HandiCalendar - tuotetta ainoana tukivälineenä lääkityksen, lääketieteellisen hoidon tai muiden välttämättömien toimien yhteydessä.

1.5.3 Vakavat tapaturmat

Jos tuotteen käytössä tapahtuu vakava tapaturma, siitä on ilmoitettava valmistajalle ja maasi toimivaltaiselle viranomaiselle.

Vaaratilanne on vakava, jos sen katsotaan suoraan tai epäsuorasti johtaneen, voivan johtaa tai epäillä johtavan johonkin seuraavista tilanteista:

- Potilaan, käyttäjän tai muun henkilön kuolema
- Potilaan, käyttäjän tai muun henkilön terveydentilan tilapäinen tai pysyvä vakava heikkeneminen
- Vakavaan uhkaan kansanterveydelle.

1.5.4 Tuotevastuu

Tuote on kehitetty ja riskiarvioitu ISO 14971 -standardin mukaisesti. Käyttöopas ja tekniset tiedot on laadittu riskianalyyseissä tehtyjen turvallisuusarviointien mukaisesti. Harkitse aina turvallisuutta käyttäessäsi tuotetta. Abilia AB ei ota vastuuta seurauksista, jotka johtuvat tuotteen väärästä käytöstä tai asennuksesta. Mikä tahansa tuotteen vaurioittaminen tai muokkaaminen mitätöi takuun ja mitätöi valmistajan vastuun. Tuotteen arvioitu käyttöikä päättee, kun tuotetta käytetään sen käyttö- ja huolto-ohjeiden mukaisesti.

1.6 Terminologia

Tässä käsikirjassa käytetään seuraavaa terminologiaa.

Laite



iPhone, iPad tai iPod Touch



Android-pohjainen älypuhelin tai tablettitietokone

HandiCalendar

Tässä oppaassa kuvattu kalenterisovellus koskee tuotetta



myAbilia



Verkkopalvelu HandiCalendarille ja muille Abilian tuotteille. myAbilia on käytettävissä osoitteessa www.myAbilia.com.

Käyttäjätili

HandiCalendarin käyttöön tarvitaan myAbilia-käyttäjätili.

Lisenssi

HandiCalendarin käyttöön on ostettava lisenssi (ilmaisen esittelyjakson jälkeen).

Asetukset-valikko

HandiCalendarin säädöt, katso 5. Asetukset-valikko.

1.7 myAbilia

MyAbilia on verkkopalvelu HandiCalendar ja muille Abilian tuotteille.

Käyttämällä myAbiliata voit:

- Hallinnoida kalenteria, tarkistuslistaa ja kuva-arkistoa tietokoneelta ja/tai tabletilla jne.
- Valita tukihenkilöt, jotka voivat esimerkiksi lisätä tai muokata muistutuksia internetissä.

Tarvitset myAbilia-käyttäjätilin, jotta voit käyttää HandiCalendar. Sinun ei kuitenkaan tarvitse käyttää varsinaista verkkopalvelua tai internetyhteyttä laitteeseen (paitsi sisäänkirjautumisen aikana).

1.7.1 myAbilian roolit

Sinulla voi olla erilaisia tilejä myAbiliassa käyttötarkoituksen mukaan. **Käyttäjä** on henkilö, joka käyttää apuvälinettä ja aina keskiössä. Käyttäjä voi tarvita apua tukihenkilöltä voidakseen käyttää kalenteriaan jne. Käytön mukaan voidaan tarvita **tilin järjestelmänvalvoja**. Tämä on henkilö, joka hallinnoi tiliä ja lisenssiä, mutta jolla ei ole käyttöoikeutta käyttäjän henkilökohtaisiin tietoihin.

Roolisi mukaan saat erilaisia lokitietoja myAbilialta, ja voit tehdä erilaisia tehtäviä verkkopalvelussa.

Rooli	Kuvaus	Toiminnot
Käyttäjä	Apuvälinettä käyttävä henkilö. Ei tarvitse olla aktiivinen verkkopalvelussa, mutta tarvitsee tilin, joka on yhdistetty apuvälineeseen.	Kalenteri, perusaktiviteetit, perusajastimet, kuva-arkisto, tarkistuslista, profiili, lisenssit, tukihenkilöt, tilin järjestelmänvalvojat
Tukihenkilö	Yksi tai useampi henkilö, joka auttaa käyttäjää apuvälineen käytössä.	Sama kuin edellä
Järjestelmänvalvoja	Henkilö, joka luo ja/tai hallinnoi käyttäjätilejä ja lisenssejä. Voi olla myös tukihenkilö.	Käyttäjätilit: Profiili, Tukihenkilöt, Tilin järjestelmänvalvojat

1.7.2 Mukauta myAbilia

Jos käytät samaa myAbilia-tiliä eri laitteissa (esim. sekä HandiCalendarissa että MEMOplannerissa), voit valita haluamasi kalenterityypin.

1.7.3 Jaa myAbilia-kalenteri

Luomalla tilauslinkin (ICS) myAbilia-kalenterille se voidaan näyttää muissa kalenterisovelluksissa, kuten Outlook ja Google. Ohjeet ovat myAbiliassa.

1.8 Kuva-arkisto HandiCalendar

Noin 300 kuvaa sisältyy aloitussarjaan. Voit mukauttaa kuva-arkistoa myAbilia-palvelussa. Voit esimerkiksi lisätä omia kuvia tai lisätä kuvia myAbilian kuvatietokannoista.

1.9 Varttikello-periaate

"Varttikello-periaate" viittaa **Varttikello-periaate**aika-apuvälineeseen, joka otettiin käyttöön 1993 ja on nyt Abilian kognitiivisten tuotteiden perusta.

Varttikellon tehtävä on laskea aika tietyn tapahtuman alkuun pisteinä ja antaa hälytys, kun aika on tullut.



Varttikello-periaate tarkoittaa

- Ajan laskemista tapahtumaan
- Kiinteä, laskettava, askelin
- Pisteet häviävät ylhäältä alas
- 1 piste = 15 minuuttia = "varttitunti"
- Yli 8 pistettä = "pitkä aika"




Miten **Varttikello -periaate** auttaa: "Näkymätön aika" muuttuu näkyväksi



- Näyttää ajan määränä
- Jokainen ymmärtää mikä on **enemmän** ja **vähemmän**, ja kun "**häviää**" on helppo ymmärtää että se tarkoittaa, että aikaa on aiempaa vähemmän jäljellä
- Termiä "piste" voi käyttää arkipuheessa
- Ei tarvetta käyttää tuntien tai minuuttien kaltaisia termejä
- Ymmärrettävä "piste" auttaa aikakäsityksen luomisessa


1.10 HandiCalendarin puhetuki

HandiCalendar on sisäänrakennettu puhetuki, eli HandiCalendarin teksti voidaan lukea ääneen puhesynteesillä.

Voit valita käytetäänkö puhetukea ja miten sitä käytetään, katso 5.19

Synteettinen puhe. Jos puhetuki on valittu, *Puhetuki*-painike  on näkyvissä. Kun haluat, että jotain luetaan ääneen:

1. Aktivoi puhetuki napauttamalla painiketta: 
2. Napauta haluttua tekstiä, esimerkiksi päivämäärää tai kellonaikaa.
3. Poista puhetuki käytöstä napauttamalla painiketta uudelleen: .
(Se poistetaan käytöstä automaattisesti muutaman sekunnin kuluttua.)

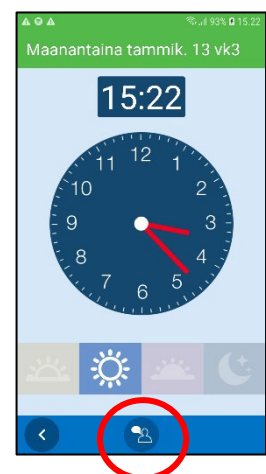

1.11 HandiCalendarin aktiviteettityypit

HandiCalendarissa on eri tyyppisiä aktiviteetteja ja niillä voi olla erilaisia ominaisuuksia.

Ajastetut aktiviteetit	<p>Ajastetuilla aktiviteeteilla on aina alkamisaika mutta niillä voi olla myös päättymisaika.</p> <p>Jos sillä on päättymisaika, aktiviteetilla on aikajanalla ”pituus”, joka tarjoaa visuaalista tukea.</p> <p>Luettelonäytössä näkyy alkamisaika ja päättymisaika selkotekstillä.</p>
Ajastetut aktiviteetit ja muistutus	<p>Ajastetuilla aktiviteeteilla voi olla muistutuksia yhdessä tai useammassa kohdassa ennen alkamista.</p> <p>Luettelonäytössä näkyvät muistutukset selkotekstillä.</p>
Ajastetut aktiviteetit ja hälytys	<p>Kun ajastetut aktiviteetit alkavat tai päättyvät, kuuluu yleensä hälytys ja/tai värinä (jos laitteessa on värinä). Voit valita onko hälytys hiljainen vai eikö hälytystä ole lainkaan.</p> <p>On myös mahdollista tallentaa puhuttuja viestejä, jotka kuullaan, kun aktiviteetti alkaa ja/tai päättyy.</p>
Kokopäivän aktiviteetit	<p>Kokopäivän aktiviteeteilla ei ole alkamisaikaa (eikä niillä voi siksi olla alkamisaikaa). Ne näytetään erikseen ajastetuista aktiviteeteista.</p>
Tarkistettavat aktiviteetit	<p>”Tarkistettava” tarkoittaa, että aktiviteetti on tarkistettava valmiiksi, kun se on valmis. Sekä ajastetut aktiviteetit että kokopäivän aktiviteetit voidaan asettaa tarkistettaviksi.</p> <p>Jos ajastettua aktiviteettiä ei ole tarkistettu tehdyksi, saat muistutuksia, kunnes merkitset aktiviteetin valmiiksi (enintään kaksi tuntia).</p>
Aktiviteetit, joissa on lisätietoa	<p>Voit yhdistää aktiviteettiin lisätietoja, esimerkiksi tarkistuslistan tai huomautuksen.</p> <p>Tarkistuslista voi olla hyvä asia, jos aktiviteetti on jaettava useaan jaksoon tai tehtävään, esimerkiksi aamurutiineihin tai tehtävälistöihin.</p> <p>Tarkistuslistan voi luoda suoraan aktiviteetista tai valita myAbilian Tarkistuslista-arkistosta.</p>
Ajastimet	<p>”Ajastin” viittaa aktiviteettiin, joka alkaa suoraan, kun lisäät sen ja asettaa hälytyksen päättymisaikaan. Ajastin toimii siis samalla tavoin kuin munakello.</p>
Toistuvat aktiviteetit	<p>Aktiviteetin voi lisätä toistumaan joka viikko (yhtenä tai useampana viikonpäivänä), joka toinen viikko, kuukausittain (yhtenä tai useampana päivänä) ja vuosittain.</p>
Perusaktiviteetit	<p>”Perusaktiviteetti” viittaa esimääritettyyn aktiviteettiin, jota käytetään, kun lisäät uusia aktiviteetteja. Voit lisätä perusaktiviteettiin nimen, kuvan, tarkistuslistan, muistutuksen jne.</p> <p>Perusaktiviteetteja käyttämällä on helpompi lisätä uusia aktiviteetteja.</p> <p>Perusaktiviteetit luodaan HandiCalendarissa (katso 5.14 Perusaktiviteetit) tai myAbiliassa.</p>
Perusajastimet	<p>”Perusajastin” viittaa esimääritettyyn ajastimeen, jossa on valokuva ja/tai nimi ja esiasetettu aika. Perusajastimet näytetään listana nimen ja mahdollisesti symbolin mukaan.</p> <p>Perusajastimet luodaan HandiCalendarissa (katso 5.15 Perusajastimet) tai myAbiliassa.</p>

2. Asennus ja lisensointi

2.1 Asennus

HandiCalendarin voi asentaa sovelluskaupasta **ilmaiseksi**.

1. Avaa sovelluskauppa laitteessasi.
2. Hae *HandiCalendar*.
3. Asenna.

HandiCalendarin käyttöön tarvitaan myAbilia-**käyttäjätili**. Luo käyttäjätili osoitteessa myAbilia.com.

Sovellusta voi käyttää ilmaiseksi rajoitetun ajan, jonka jälkeen tarvitaan **lisenssi**. Lisenssin voi ostaa Abilialta ja rekisteröidä osoitteessa myAbilia.com.

2.2 Päivitykset

HandiCalendarin päivitykset tehdään laitteen järjestelmäasetuksissa:



Katso kohta *Asetukset*|*Yleistä*|*Taustapäivitys*



Katso kohta *Google Play*|*Asetukset*

2.3 Lisenssin hallinta

Kun HandiCalendar ostetaan, sen lisenssiavain ja lisenssin kesto aika mainitaan ostotositteessa.

Lisenssi avain on rekisteröitävä käyttäjätiliin, katso ohjeet seuraavasta.

Varoitus lisenssin vanhentumisesta näytetään HandiCalendarissa hyvissä ajoin (3 kuukautta, 3 viikkoa ja 3 päivää). Tukihenkilöt ja järjestelmänvalvojat saavat sähköpostimuistutuksen lisenssin vanhenemisesta ja uusimistarpeesta.

Kun lisenssi on vanhentunut, sinut kirjataan ulos HandiCalendarista. Kaikki tiedot kuitenkin säilyvät käyttäjätilillä ja voit jatkaa HandiCalendarin käyttöä normaalisti, kun lisenssi on uusittu.

2.3.1 Rekisteröi lisenssiavain



1. Kirjaudu käyttäjätilille, avaa Oma profiili ja valitse Lisenssit-välilehti.
2. Napsauta Lisää lisenssi ja anna lisenssiavain.

HandiCalendar päivitetään automaattisesti lisenssitiedoilla, kun laite on verkkoyhteydessä.

2.3.2 Lisenssitiedot

Lisenssin päättymispäivä näkyy laitteessa ja myAbiliassa



Kirjaudu käyttäjätilille, avaa Oma profiili ja valitse Lisenssit-välilehti.



Avaa *Asetukset*-sovellus ja valitse *HandiCalendar*.



Avaa *HandiCalendar*-sovellus, siirry kohtaan *Asetukset* ja sitten kohtaan *Tietoja Handista*.

2.3.3 Lisenssin jatkaminen

Lisenssin voimassaolon jatkamiseksi lisenssin päättymispäivästä on tilattava Abilialta tuote *706382 HandiCalendar Extension*. Lisenssiavain on annettava tilauksessa.

Abilia jatkaa sen jälkeen lisenssiä ehtojen mukaisesti. Laitteessa näytetään ilmoitus, kun toimenpide on valmis.

3. HandiCalendarin käyttöönottaminen

Tässä luvussa oletetaan, että laite on yhdistetty verkkoon, HandiCalendar on asennettu laitteeseen ja käytössäsi on käyttäjätili.

3.1 Kirjautuminen HandiCalendariin

Käynnistä HandiCalendar laitteessa ja anna käyttäjätilisi kirjautumistiedot.

Jotta voit käyttää HandiCalendaria, sinun on oltava aina kirjautunut. Jos kirjaudut ulos, kaikki HandiCalendar-tiedot häviävät laitteesta mutta säilyvät tallessa käyttäjätilillä. Voit kirjautua ulos Asetuksista, katso 5.22 *Kirjaudu ulos*.

3.2 Asenna puhetuki (Android)



Kun olet kirjautunut sisään, voit ladata puhetuen äänet. Valitse haluamasi ääni (äänet), napauta sitten *Seuraava*. Samalla kun ääni(ä) ladataan, näytetään edistymispalkki.

Huomaa, että äänet voi ladata myös asetuksista, katso 5.19 *Synteettinen puhe*.

3.3 Lisää aloitussarja

Kun käyttäjätili on aivan uusi, voit lisätä aloitussarjan ja sen sisältämän oletuskuva-arkiston sekä esimerkkejä perusaktiviteeteista, perusajastimista ja tarkistuslistoista.

Aloitussarjaa voi mukauttaa myöhemmin *myAbiliassa* tai suoraan HandiCalendarissa.

3.4 HandiCalendarin säädöt

HandiCalendar voidaan mukauttaa monella tavalla eri käyttäjille sopivaksi. Kaikki asetukset valitaan asetusvalikossa, katso 5. Asetukset-valikko.

Löydät haluamasi asetukset **mukautusoppaasta**. Lataa osoitteesta www.abilia.com tai pääset helposti oppaisiin takasivun QR-koodilla.


4. Kalenteritoiminnot

Kalenterin avulla näet päivän, viikon ja kuukauden yleiskuvan. Saat muistutuksen, kun jotain alkaa tai päättyy. Saat muistitukea sille oletko tehnyt tehtäväsi.

4.1 Kalenterinäkymä

Kalenterinäkymä näyttää kalenterin aktiviteetit neljänä näkymänä:


Aikapylväsnäkymä

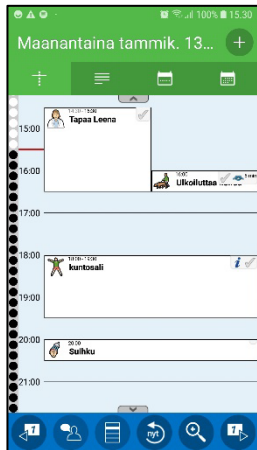


Luettelonäkymä




Viikkonäkymä

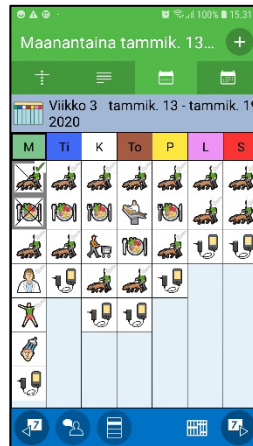

Kuukasinäkymä

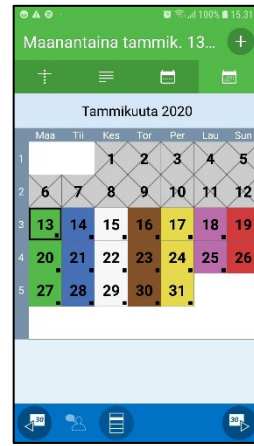

Voit vaihtaa kalenterinäkymien välillä kunkin näkymän kuvakkeista:

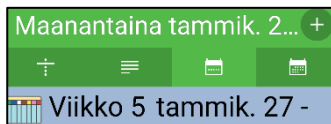

Uusia aktiviteetteja lisätään -painikkeella tai Kalenterivalikossa . Kun napautat aktiviteettia, sen tiedot näytetään, katso 4.2 Aktiviteettinäkymä.

Kalenterinäkymän painikerivissä on seuraavat painikkeet:



Selaa yksi päivä/viikko/kuukausi taaksepäin.




Siirry tähän päivään tai nykyhetkeen. (Näkyv vain, kun olet selannut toiseen päivään tai kun seuraavaa aktiviteettia ei näytetä luettelon yläreunassa.)



Avaa Kalenterinäkymä ja aloita muita toimintoja tai muokkaa asetuksia, katso 4.1.5 .



 Punainen piste näkyy Valikko-painikkeessa, jos tarkistamattomia hälytyksiä on, katso 4.3.1 Menneet hälytykset.



Puhetuki. Paina painiketta ja sitten kohtaa, jonka haluat luettavan ääneen.



Selaa yksi päivä/viikko/kuukausi eteenpäin.


Kalenterinäkymää voi mukauttaa monella tavalla, katso 5.2 Kalenterinäkymä ja 5.8 Ajan näyttö.

4.1.1 Aikapylväsnäkymä


Aikapylväsnäkymässä näytetään päivän aktiviteetit ”aikapylvään” vieressä, ja kukin piste vastaa neljännestuntia.

Aika näytetään digitaalisena joka tunti ja punaisena pisteiviivana nykyiseen kellonaikaan.

Aktiviteetit, joilla ei ole päättymisaikaa näytetään 30 minuuttia kestävinä.

Jos aktiviteetteja on enemmän kuin mitä kerralla voidaan näyttää näytössä, *Näytä lisää* symbolit ovat näkyvissä . Pyyhkäise ylös/alas nähdäksesi kaikki aktiviteetit.

Kun napautat aktiviteettia, näkyviin tulee *Aktiviteettinäkymä*, katso 4.2 *Aktiviteettinäkymä*.

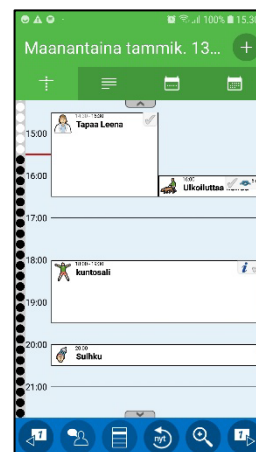


Aikapylvään näyttö



Aikapylvääseen voi asettaa pienen tai suuren zoomauksen, katso 5.2. Pienellä zoomilla näet suuremman osan päivästä mutta pienemmät kuvat ja tekstin. Suurella zoomilla näet suuremmat kuvat ja tekstin mutta pienemmän osan päivästä.




Napauta kohtaa  aikapylvään lähentämiseksi/loitontamiseksi, jolloin samassa näkymässä näkyy suurempi/pienempi osa päivää. Zoomaus tapahtuu vaiheittain.

4.1.2 Luettelonäkymä

Luettelonäkymässä näkyvät kalenteriaktiviteetit siinä järjestyksessä missä ne tapahtuvat päivän aikana.

Jo tapahtuneet aktiviteetit ovat piilotettuna. Pyyhkäise alaspäin nähdäksesi sen.

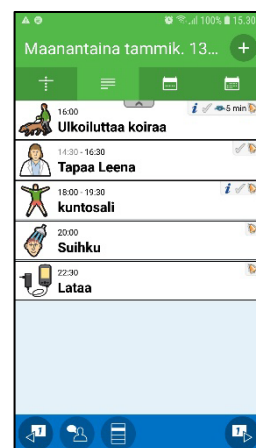


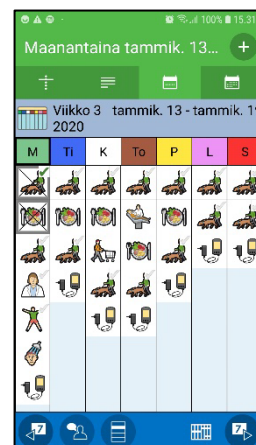
4.1.3 Viikkonäkymä

Viikkonäkymä näyttää koko viikon aktiviteetit.

Aktiviteetit esitetään joka päivä siinä järjestyksessä kuin ne tapahtuvat. Kun napautat aktiviteettia, *Aktiviteettinäkymä* tulee näkyviin.



Vaihda tunti- ja puolituntiosuuksiin napauttamalla . Tämä tarkoittaa, että voit asettaa vapaa/varattu-ajat suunniteltujen aktiviteettien sijaan.



4.1.4 Kuukasinäkymä

Kuukausinäkylässä näkyvät koko kuukauden aktiviteetit.

Tiettyjen päivien merkinnät tarkoittavat, että niinä päivinä on aktiviteetteja.



Valitun päivän aktiviteetit näytetään luettelonäkymässä.



4.1.5 Kalenterivalikko

Kun napautat kohtaa  *Kalenterinäkylässä*, *Kalenterivalikko* näytetään. Voit asettaa mitä kalenterivalikossa näytetään, katso 5.7.

Tästä voi aloittaa lisää kalenteritoimintoja tai avata *Asetukset-valikon*.



4.1.6 Julkiset lomapäivät

Kalenterissa voi näyttää **julkiset lomapäivät** ja **erikoispäivät**. Yleiset vapaapäivät ovat päiviä, jolloin et ole esimerkiksi töissä tai koulussa. Erikoispäivä tarkoittaa että päivä on erityinen, mutta se ei ole vapaa päivä, esimerkiksi Kiirastorstai.

Julkiset lomapäivät ovat maakohtaisia. Seuraavat julkiset vapaapäivät koskevat Isoa-Britanniaa:

Uudenvuodenpäivä
Loppiainen
Ystävänpäivä
Pitkäperjantai
Pääsiäissunnuntai
Pääsiäismaanantai
Vappu

Vapunpäivä
Helatorstai
Äitienpäivä
Helluntai
Juhannusaatto
Juhannuspäivä
Pyhäinpäivä


Isänpäivä
Itsenäisyyspäivä
Jouluaatto
Joulupäivä
Tapaninpäivä
Uudenvuodenaatto

Julkiset vapaapäivät ja erikoispäivät näytetään eri tavoin näkymän mukaan:


Kuukausinäkymä



Viikonäkymä

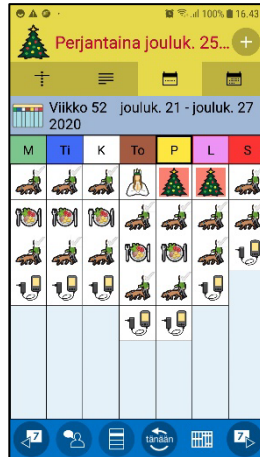

Kalenterinäkymä

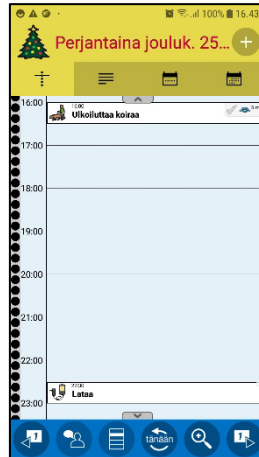

Aktiviteettinäkymä



Voit asettaa näytetäänkö julkiset vapaapäivät, katso 5.8.4 Näytä juhlapyhät.


4.2 Aktiviteettinäkymä

Aktiviteettinäkymässä näytetään lisätietoja aktiviteetista. Se avataan napauttamalla aktiviteettia *Kalenterinäkymässä*.





Aktiviteetin alkamislaskuri näkyy "pisteinä".

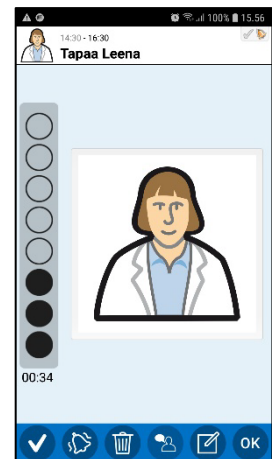Kuvan voi näyttää kokonäytössä napauttamalla sitä.

Katso kuvaus **yhdistetyt toiminnot** seuraavassa.



Painikerivissä on seuraavat painikkeet:

-  *Tarkista*-painike. Tarkista aktiviteetti valmiiksi painamalla *Tarkista*-painiketta.
-  *Hälytys*-painike. Halutun hälytyssäänien asetat painamalla *Hälytys*-painiketta, katso 4.9.13. (Sen voi tehdä myös *Muokausnäkymässä*.)
-  *Poista*-painike. Aktiviteetti poistetaan painamalla *Poista*-painiketta, katso luku 4.8 *Poista aktiviteetti tai ajastin*.
-  *Muokkaa*-painike. Voit muokata aktiviteetin tietoja *Muokkaa*-painikkeella, katso luku 4.9 *Muokausnäkymä*.




Voit asettaa mitkä painikkeet näytetään, katso luku 5.3 *Aktiviteettinäkymä*.

4.2.1 Yhdistetty muistiinpano, äänimuistiinpano, ajastin

Muistiinpanon voi lukea ääneen *Puhetuki*-painikkeella.

Äänimuistiinpano voidaan toistaa ääneen, kun painat *Toisto*-painiketta.

Esiasetettu ajastin käynnistyy, kun napautat *Käynnistä ajastin* -painiketta.

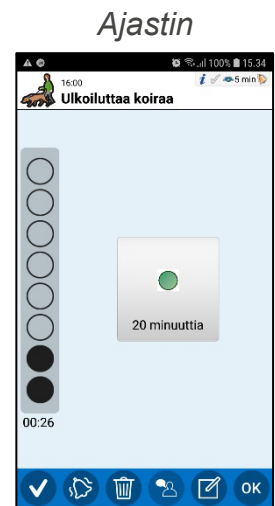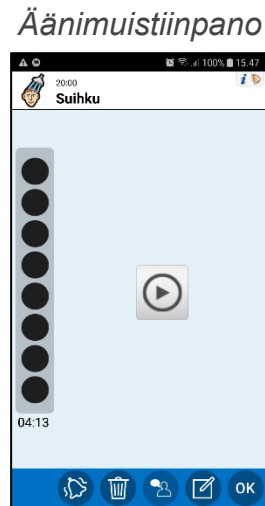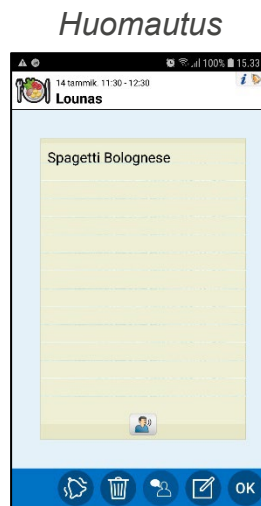

4.2.2 Yhdistetty tarkistuslista

Tarkistuslistan tehtävät näytetään tekstinä ja/tai kuvina jokaisen tehtävän kohdalla.

Napauta kuvaa nähdäksesi sen kokonäytössä.

Tarkista tehdyt tehtävät valmiiksi napauttamalla niitä ja ne saavat ✓ -symbolin.



Tarkistuslista




4.2.3 Yhdistetty järjestelmätoiminto

”Järjestelmätoiminto” viittaa puhelimen sisäisiin toimintoihin, kuten *Kuva*, *Tekstiviesti*, *Linkki*, *Osoite* tai *Puhelinnumero*.

Osoite avataan laitteessa halutulla karttasovelluksella.

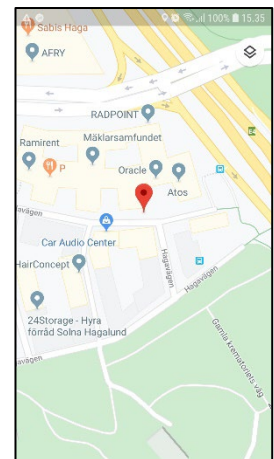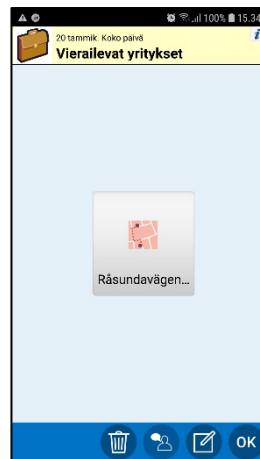

Linkki avataan laitteessa halutulla selainsovelluksella.


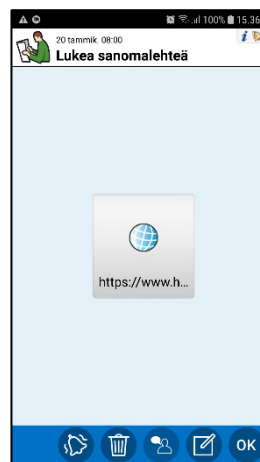


4.2.4 Yhdistetyt kolmansien osapuolten sovellukset (Android)




Kolmansien osapuolten sovellukset ovat sovelluksia, jotka on ladattu Google Playsta, esimerkiksi aikataulut, äänikirjalukijat, uutiset, Spotify ja Facebook.

Kolmannen osapuolen sovellus avataan, kun napautat sen painiketta.

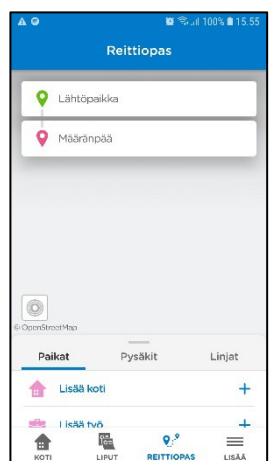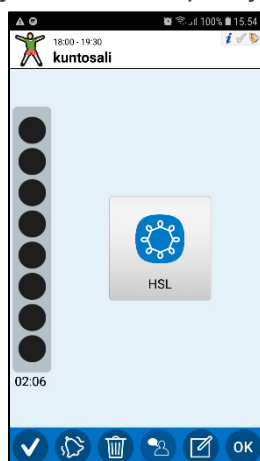

4.3 Hälytykset ja muistutukset

 **VAROITUS:** Älä käytä HandiCalendar - tuotetta ainoana tukivälineenä lääkityksen, lääketieteellisen hoidon tai muiden välttämättömien toimien yhteydessä.

Hälytysnäkymä näytetään, kun yksi tai useampi aktiviteetti on asetettu alkamaan tai päättymään. Sen voi myös näyttää aktiviteettia edeltävänä muistutuksena tai jos aktiviteetin tarkistus on unohdettu.




Jos et jo ole HandiCalendarissa, laitteessa näytetään **ilmoitus**. Napauta ilmoitusta ja avaa *Hälytysnäkymä*.

Jos haluat pitkän hälytyssignaalin, valitse pitkä hälytysääni, katso *5.17 Hälytysääni*.



Asetuksista riippuen (katso *5.18 Hälytysnäkymä (Android)*) näytetään **Hälytysnäkymä tai ilmoitus**. Napauta ilmoitusta ja avaa *Hälytysnäkymä*.

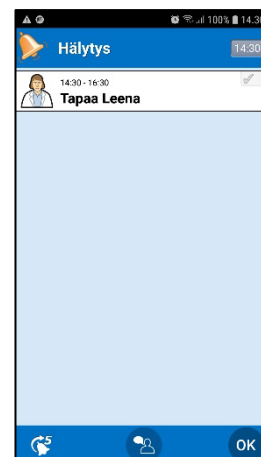

Jos hälytys koskee tarkistettavaa aktiviteettia, voit valita aktiviteetin tarkistetuksi *Aktiviteettinäkymässä*.

4.3.1 Menneet hälytykset (iOS)




Menneet hälytykset kuvataan seuraavassa.



Merkki *Valikko*-painikkeessa *Kalenterinäkymässä*. Näet menneet hälytykset avaamalla kohdan *Kalenterivalikko | Menneet hälytykset*.



Merkki HandiCalendar-kuvakkeessa laitteen aloitusnäytössä.

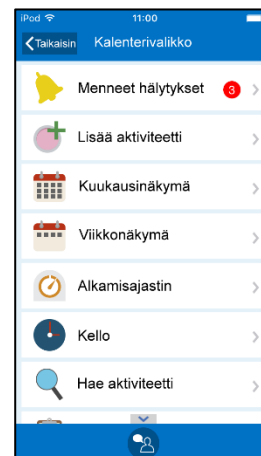

4.4 Lisää aktiviteetti




Lisää näkymä kohdassa *Kalenterinäkymä* tai *Kalenterivalikko*.



Käytettävissä on eri tapoja, jotka kuvataan tässä. Valitse tapa asetuksissa, katso *5.4 Lisää aktiviteetti*.

4.4.1 Lisää aktiviteetti muokkausnäkyssä

4.4.1.1 Valitse tyyppi

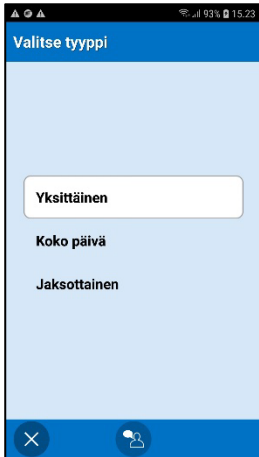


Valitse millaisen aktiviteetin haluat lisätä. Seuraavassa kuvataan vaihtoehto *Yksi*.

Koko päivä on kuvattu kohdassa *4.4.3 Lisää kokopäivän aktiviteetti*.

Toistuva on kuvattu kohdassa *4.4.4 Lisää toistuva aktiviteetti*.

4.4.1.2 Anna aktiviteettien ominaisuudet Muokkausnäkyssä

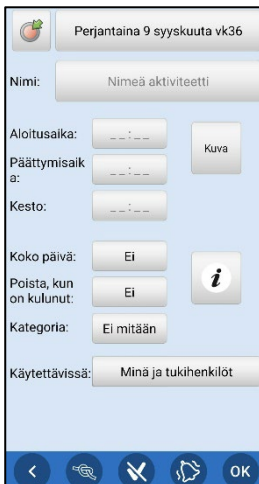

Lisää aktiviteetin ominaisuudet *Muokkausnäkyssä*, esimerkiksi nimi ja alkamisaika.


Muokkausnäky on kuvattu kohdassa *4.9*.

Kun painat *OK*, aktiviteetti tarkistetaan ja lisätään kalenteriin.

4.4.2 Lisää aktiviteetti vaiheittain

Kun käytät vaihe vaiheelta -tapaa, lisää vain yleensä käytetyt vaiheet, jotta vaiheiden määrää saadaan vähennettyä. Katso kaikki asetukset kohdassa *5.4 Lisää aktiviteetti*.


4.4.2.1 Aseta päivämäärä

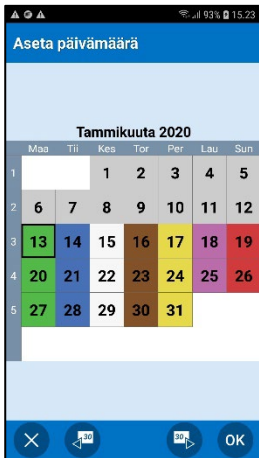

Valitse haluamasi päivämäärä.

(Voit mukauttaa HandiCalendaria siten, että aktiviteetteja on mahdollista lisätä vain tulevaan. Menneet päivämäärät ovat pois käytöstä.)

4.4.2.2 Valitse tyyppi

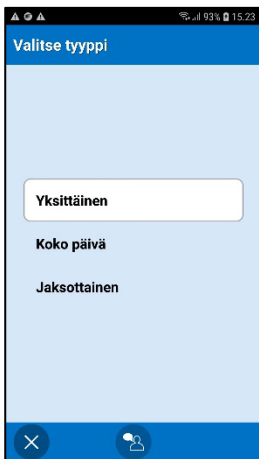

Valitse millaisen aktiviteetin haluat lisätä. Seuraavassa kuvataan vaihtoehto *Yksi*.

Koko päivä on kuvattu kohdassa 4.4.3 *Lisää kokopäivän aktiviteetti*.

Toistuva on kuvattu kohdassa 4.4.4 *Lisää toistuva aktiviteetti*.

4.4.2.3 Valitse perusaktiviteetti




Katso kuvaus perusaktiviteeteista kohdasta 1.11 HandiCalendarin aktiviteettityypit.

Jos et halua käyttää perusaktiviteetteja, valitse "Ei perusaktiviteetteja".

Jos perusaktiviteetti valitaan, siirryt suoraan 4.4.2.11 *Määritä aloitusaika* 4.4.2.11 -näkömään.

4.4.2.4 Valitse kuva

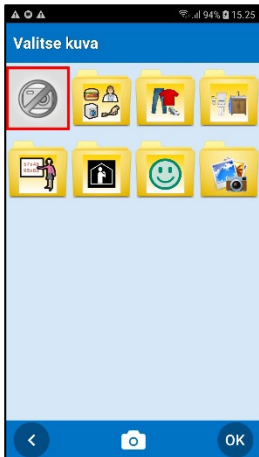

Valitse aktiviteetin kuva kuva-arkistosta.

Jos aktiviteetissa ei tarvita kuvaa, napauta *OK*.


4.4.2.5 Nimeä aktiviteetti



Kirjoita aktiviteetin nimi.

Aktiviteetissa on oltava joko nimi tai kuva.

4.4.2.6 Tietovalikko

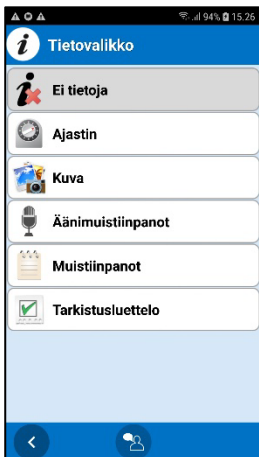

Lisää aktiviteettiin lisätietoja. (Katso kuvaus kohdassa 4.2 *Aktiviteettinäköymä*.)



Jos aktiviteetissa ei ole lisätietoja, valitse "Ei tietoja".

Aseta tietovalikon kautta käytettävissä olevat toiminnot, katso 5.6 *Tietovalikko*.

4.4.2.7 Poista, kun on kulunut, Tarkista ja Hälytys



Huomaa, että *Poista, kun on kulunut*, *Tarkista ja Hälytys* annetaan eri tavalla iOS-käyttöjärjestelmässä.

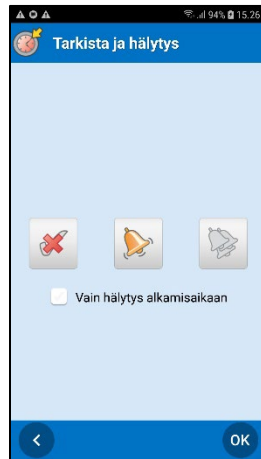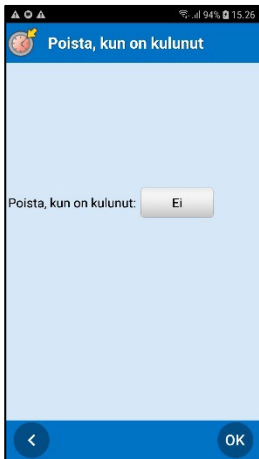

"Poista, kun on kulunut": Aktiviteetti poistetaan automattisesti tapahtumapäivää seuraavana päivänä.



Tarkista aktiviteetti pois/päällä



Äänihälytys päällä/pois




Värinähälytys päällä/pois

Vain hälytys alkamisaikaan: Hälytystä ei anneta, kun hälytys päättyy

Yksittäisille aktiviteeteille oletusasetus "Poista, kun on kulunut" on *Ei*. (Kyllä toistuville aktiviteeteille).

4.4.2.8 Valitse kategoria

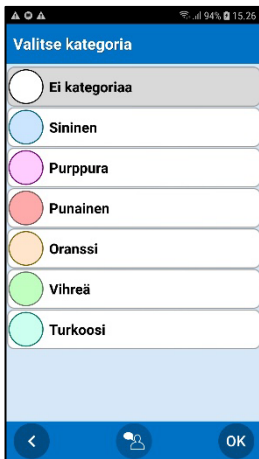


Aseta aktiviteetin luokan väri.

Jos aktiviteetissa ei ole luokan väriä, valitse "Ei luokkaa".

Luokat määritetään asetusvalikossa, katso 5.16 *Kategoria*.

4.4.2.9 Käytettävissä

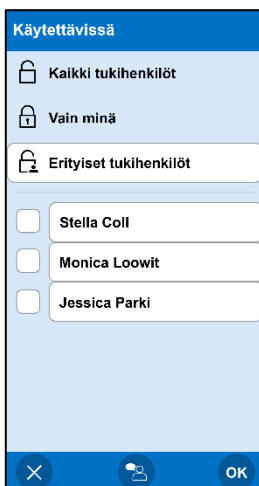

Valitse, kenelle aktiviteetin tulee olla näkyvissä.

Valitse yksi kolmesta vaihtoehdosta:

Vain minä

Aktiviteetti ei näy muille.

Kaikki tukihenkilöt
(oletus)

Aktiviteetti näkyy kaikille tukihenkilöille myAbiliassa.

Erityiset tukihenkilöt

Aktiviteetti näkyy vain valituille tukihenkilöille myAbiliassa. Ota halutut tukihenkilöt käyttöön käytettävissä olevien tukihenkilöiden luettelosta.




Riippulukon kuvake osoittaa, että aktiviteetti on asetettu *Vain minä*.

4.4.2.10 Anna muistutus



Aseta aktiviteetille yksi tai useampi muistutus.

4.4.2.11 Määritä aloitusaika

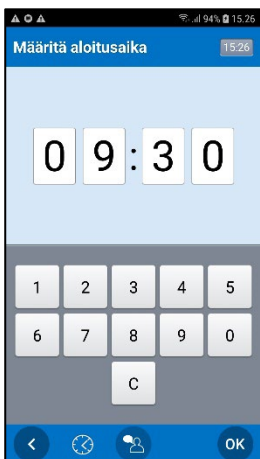


Anna aktiviteetin alkamisaika neljänä numerona.

Kun napautat *OK*, ja tämä on viimeinen näkymä vaihe vaiheelta - ohjeessa, aktiviteetti tarkistetaan ja lisätään kalenteriin.

Näkymässä näytetään 24 tunnin kello, sen voi muuttaa 12 tunnin kelloksi laitteen yleisissä asetuksissa.


4.4.2.12 Määritä päättymisaika

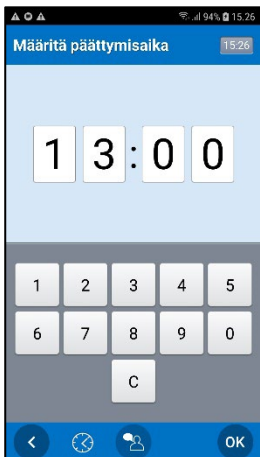

Anna aktiviteetin alkamisaika neljänä numerona.

Kun napautat *OK*, aktiviteetti tarkistetaan ja lisätään kalenteriin.

4.4.3 Lisää kokopäivän aktiviteetti

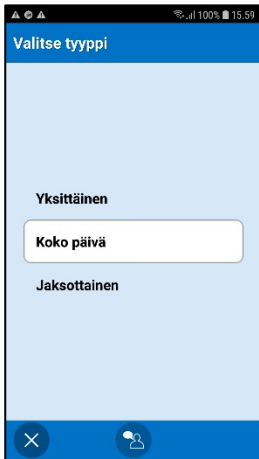


Valitse kokopäivä, jos lisäät aktiviteetin ilman erityistä alkamisaikaa.

Lisää aktiviteetti -asetuksesta riippuen jatkat kohtaan *Muokkausnäky* tai vaihe vaiheelta -oppaaseen.

4.4.4 Lisää toistuva aktiviteetti

Sen sijaan että lisäät saman aktiviteetin jokaisena tapahtumispäivänä, sen voi lisätä kerran "toistuvana" aktiviteettina.

4.4.4.1 Valitse tyyppi

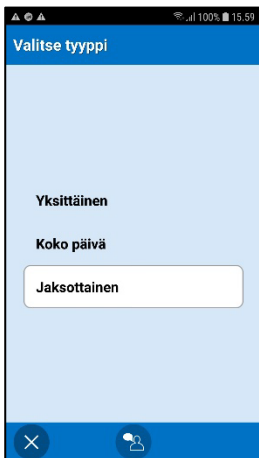


Valitse *Ajoittainen*-vaihtoehto.

4.4.4.2 Valitse päivät



Valitse kuvio, jonka mukaan aktiviteetti pitäisi toistaa. Sen voi lisätä tapahtumaan *Viikoittain*, *Kuukausittain* tai *Vuosittain*.

Tekemäsi valinnan mukaan jokin kolmesta seuraavasta näkymästä näytetään.

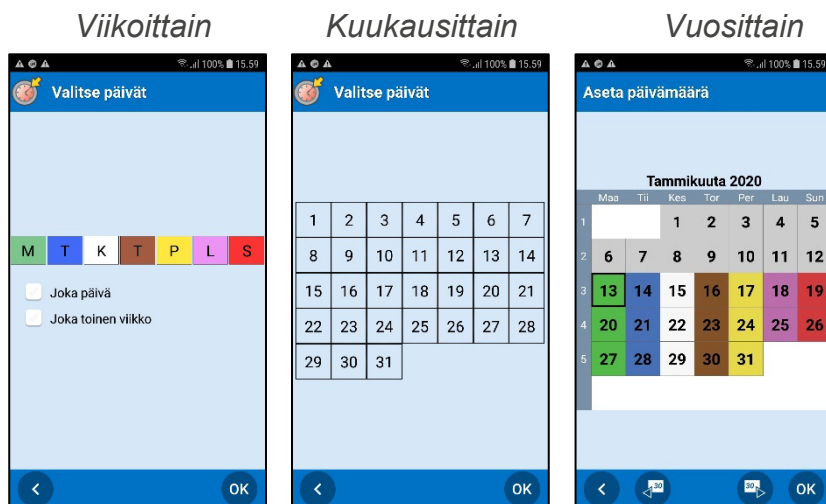


Viikoittain: Voit valita useita päiviä, esim. joka tiistain ja torstain. Voit valita kaikki päivät ja/tai joka toisen viikon valitsemalla valintaruutuja.

Kuukausittain: Voit valita useita päiviä, esimerkiksi 1. ja 15. päivän.

Vuosittain: Valitse päivä, jolloin aktiviteetti lisätään ensimmäisen kerran.

4.4.4.3 Päätymispäivä

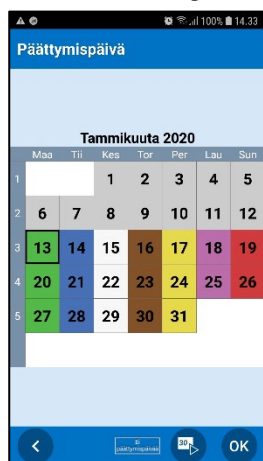

Valitse päätymispäivä, eli viimeinen päivä, jolloin aktiviteetti toistuu.

Jos aktiviteetilla ei ole päätymispäivää, valitse *Ei päätymispäivää*. Tämä tarkoittaa, että se lisätään jatkuvasti.


Lisää aktiviteetti -asetuksesta riippuen jatkat kohtaan *Muokkausnäky* tai vaihe vaiheelta -oppaaseen.

Huomaa, että "Poista, kun on kulunut" on esiasetuksena *Kyllä* toistuvissa aktiviteeteissa. Tämä tarkoittaa, että jos et muuta asetukseksi *Ei*, toistuvia aktiviteetteja ei tallenneta seuraavalle päivälle. (Katso 4.9.8 Valitse "Poista, kun on kulunut".)


4.5 Tarkista aktiviteetti valmiiksi

Tarkistettava aktiviteetti voidaan valita tarkistetuksi "aina, kun haluat" tai hälytyksen yhteydessä. Molemmat tavat on kuvattu seuraavassa.

4.5.1 Tarkista aktiviteetti valmiiksi Aktiviteettinäkyssä

Merkitse aktiviteetti tarkistetuksi "aina, kun haluat" avaamalla *Aktiviteettinäky* ja vahvistamalla aktiviteetin suorituksen painamalla *Tarkista*-painiketta .


Hälytystä ei anneta, jos aktiviteetti on tarkistettu valmiiksi etukäteen.

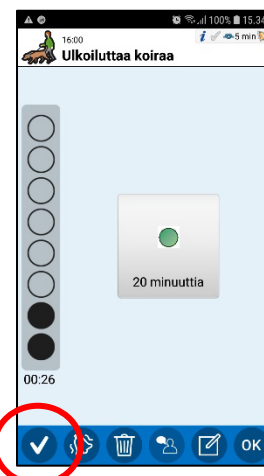


4.5.2 Tarkista aktiviteetti valmiiksi hälytyksen yhteydessä

Kun tarkistettavalle aktiviteetille on hälytys, voit merkitä aktiviteetin valmiiksi. Jos valitset *Kyllä*, aktiviteetti merkitään valmiiksi.

Jos valitset *Ei*, aktiviteettia ei merkitä valmiiksi, ja saat muistutuksen **15 minuutin välein kahden tunnin ajan**.

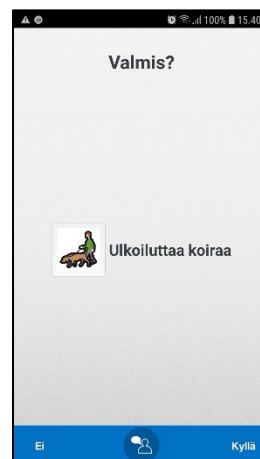


4.6 Käynnistä ajastin

 Käynnistä ajastin kohdassa *Kalenterivalikko*.

Voit joko antaa ajastimeen oman ajan tai valita esiasetetun ajastimen (perusajastin). Kuvaus perusajastimien luomisesta on luvussa 5.15 *Perusajastimet*.

Näkyviin tulee seuraava opas:

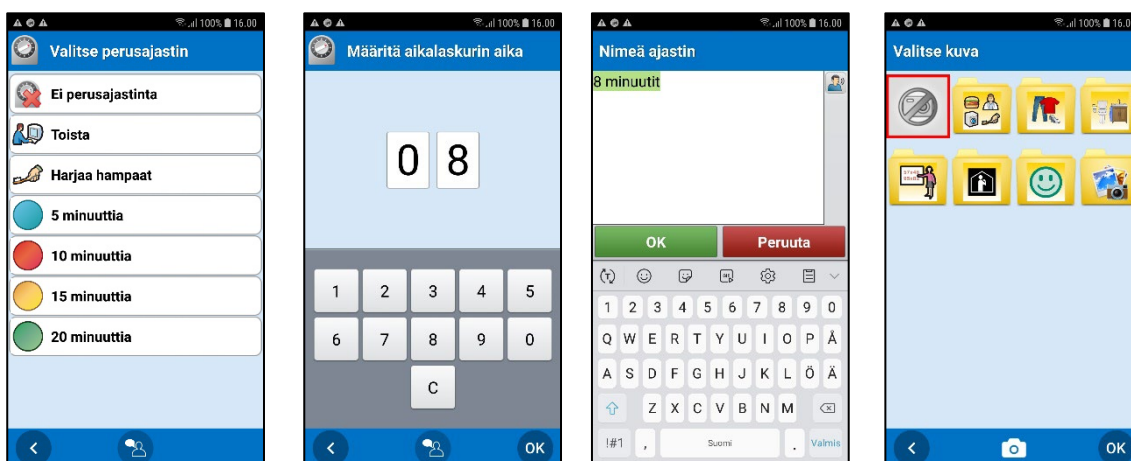


Valitse perusajastin tai valitse "Ei perusajastinta", jos haluat lisätä oman ajastimen. Ajastin näkyy *Kalenterinäkylässä*.


Voit asettaa miten ajastimen aika on annettava, katso 5.13.1 *Ajastimen aika*.

Jos et anna ajastimelle kuvaa tai nimeä, sille annetaan automaattisesti nimi ajan mukaan esim. "10 minuuttia".

Voit myös yhdistää ajastimen aktiviteettiin, katso 4.2.1 *Yhdistetty muistiinpano, äänimuistiinpano, ajastin*.

4.7 Muokkaa aktiviteettia tai ajastin

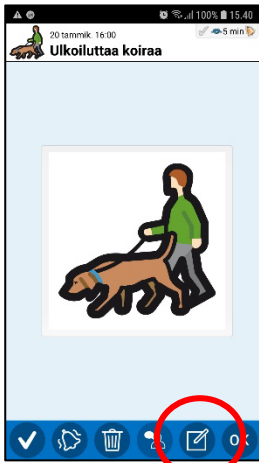

Muokkaa aktiviteettia tai ajastinta avaamalla *Aktiviteettinäköymä* ja napauttamalla *Muokkaa*-painiketta .

Voit muokata aktiviteetin ominaisuuksia *Muokkausnäköymässä*, katso 4.9 *Muokkausnäköymä*.

Kun olet tehnyt halutut mukautukset, napauta OK.

Jos kyseessä on yksi aktiviteetti, muokkaukset tallennetaan suoraan.

Jos kyseessä on toistuva aktiviteetti, valitse muokataanko aktiviteettia *Vain tänään* vai *Tästä päivästä lähtien*.

4.8 Poista aktiviteetti tai ajastin




Poista aktiviteetti tai ajastin avaamalla *Aktiviteettinäköymä* ja napauttamalla *Poista*-painiketta .

Jos kyseessä on yksi aktiviteetti tai ajastin, vahvista sen poistaminen napauttamalla OK.

Jos kyseessä on toistuva aktiviteetti, valitse poistetaanko aktiviteetti *Vain tänään*, *Tästä päivästä lähtien* vai *Joka päivä*.


4.9 Muokkausnäkö

Muokkausnäköä käytetään aktiviteettien luomiseen ja muokkaamiseen, katso 4.4.1 Lisää aktiviteetti muokkausnäkössä ja 4.7 Muokkaa aktiviteettia tai ajastin.

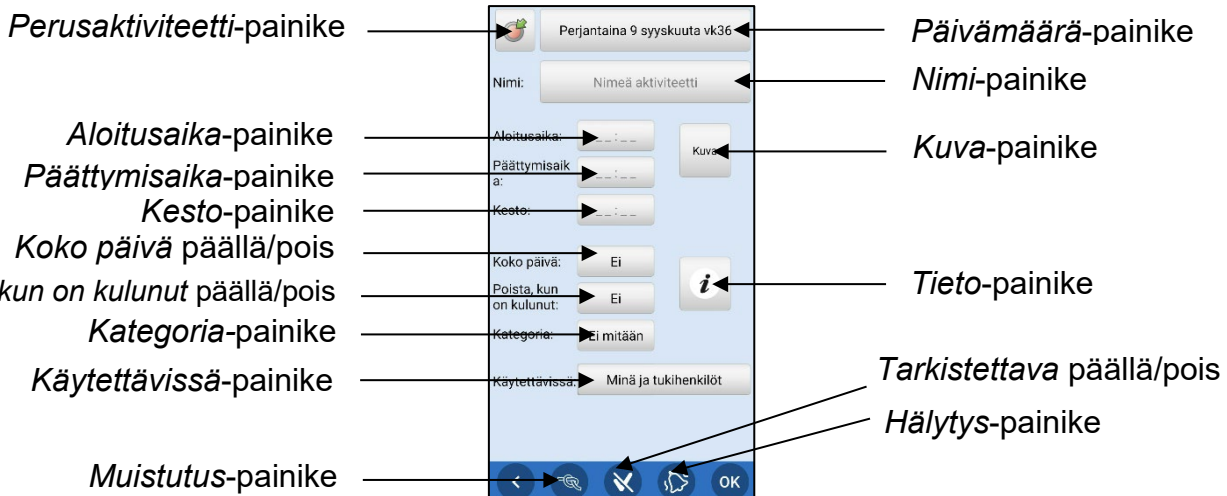

Voit asettaa *Muokkausnäkö*ssä näytettävät ominaisuudet, katso 5.5 *Muokkausnäkö*.

4.9.1 Aseta päivämäärä

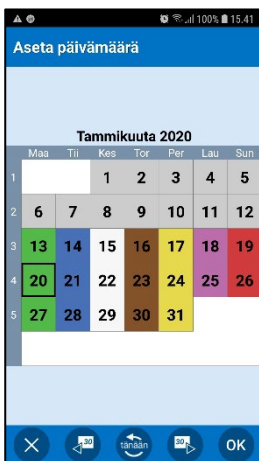

Valitse haluamasi päivämäärä.

(Voit mukauttaa HandiCalendaria siten, että aktiviteetteja on mahdollista lisätä vain tulevaan. Menneet päivämäärät ovat pois käytöstä.)

4.9.2 Nimeä aktiviteetti



Kirjoita aktiviteetin nimi.

Aktiviteetissa on oltava joko nimi tai kuva.

4.9.3 Valitse perusaktiviteetti




Katso kuvaus perusaktiviteeteista kohdasta 1.11 *HandiCalendarin aktiviteettityypit*.

Kun olet valinnut perusaktiviteetin, sen ominaisuudet lisätään aktiviteettiin.


(*Perusaktiviteetti*-painike on käytettävissä vain, kun luodaan aktiviteettia.)

4.9.4 Valitse kuva

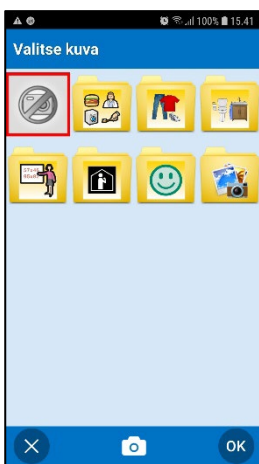


Valitse aktiviteetin kuva kuva-arkistosta.

4.9.5 Määritä aloitusaika

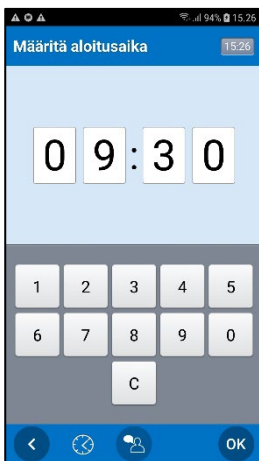

Anna aktiviteetin alkamisaika neljänä numerona.

4.9.6 Määritä päättymisaika

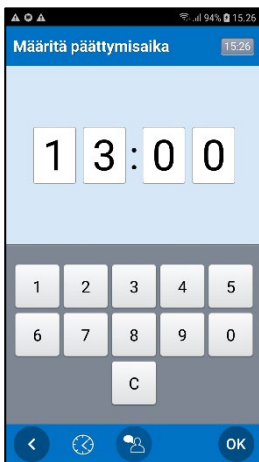

Anna aktiviteetin alkamisaika neljänä numerona.

4.9.7 Valitse ”Koko päivä”

Määritä onko aktiviteetti ajastettu vai ei.


4.9.8 Valitse ”Poista, kun on kulunut”

Määritä poistetaanko aktiviteetti automattisesti tapahtumapäivää seuraavana päivänä.

4.9.9 Aseta tarkistettava

Aseta onko aktiviteetti tarkistettava tehdyksi, kun se on valmis.

4.9.10 Valitse kategoria

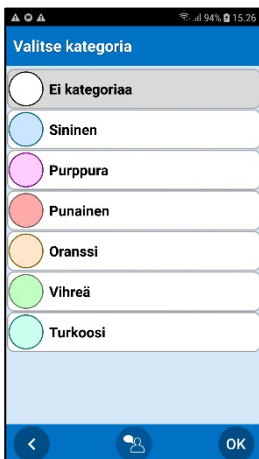


Aseta aktiviteetin luokan väri.

Jos aktiviteetissa ei ole luokan väriä, valitse ”Ei luokkaa”.

Luokat määritetään asetusvalikossa, katso 5.16 *Kategoria*.

4.9.11 Käytettävissä

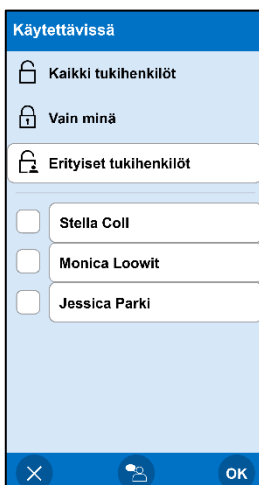

Valitse, kenelle aktiviteetin tulee olla näkyvissä.

Valitse yksi kolmesta vaihtoehdosta:


Vain minä Aktiviteetti ei näy muille.

Kaikki tukihenkilöt Aktiviteetti näkyy kaikille tukihenkilöille myAbiliassa.
(oletus)

Erityiset tukihenkilöt Aktiviteetti näkyy vain valituille tukihenkilöille myAbiliassa. Ota halutut tukihenkilöt käyttöön käytettävissä olevien tukihenkilöiden luettelosta.

 Riippulukon kuvake osoittaa, että aktiviteetti on asetettu *Vain minä*.

4.9.12 Tietovalikko

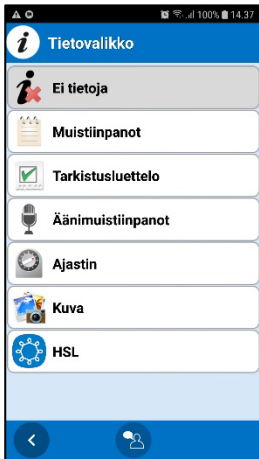

Lisää aktiviteettiin lisätietoja. (Katso kuvaus kohdassa 4.2 *Aktiviteettinäkymä*.) Eri toiminnot yhdistetään eri tavoin. Näet seuraavasta miltä se voi näyttää.

Jos aktiviteetissa ei ole lisätietoja, valitse "Ei tietoja".


Aseta tietovalikon kautta käytettävissä olevat toiminnot, katso 5.6 *Tietovalikko*.

Huomautus




Tee uusi muistiinpano tai käytä jo olemassa olevaa. Kirjoita huomautuksen teksti.

Tarkistuslista

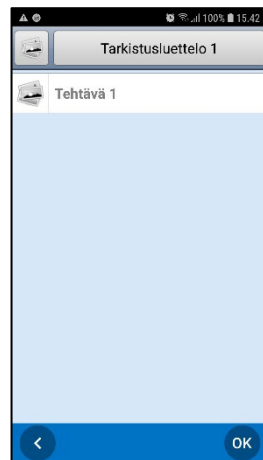

Tee uusi tarkistuslista tai käytä jo olemassa olevaa. Anna kuva ja/tai teksti tarkistuslistan tehtäviin.

Äänimuistiinpano

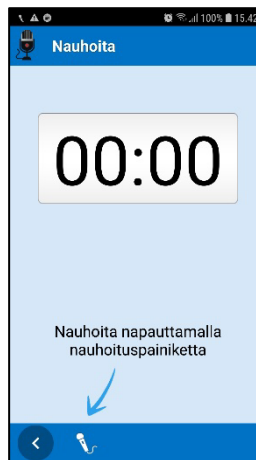

Tee uusi tallennus tai käytä jo olemassa olevaa. Aloita äänimuistiinpanon tallennus painamalla *Aloita nauhoitus*.

Ajastin



Valitse perusajastin tai *Ei perusajastinta* ja anna ajastimen aika, nimi ja/tai kuva.

4.9.13 Valitse hälytys




Valitse millainen hälytys aktiviteetilla on.

- Hälytys + värinä
- Hälytys
- Värinä
- Äänetön hälytys (hälytys vain hälytysnäkyssä)
- Ei hälytystä (ei hälytysnäkyä eikä ääntä/värinää)
- Vain hälytys alkamisaikaan (ei hälytystä päättymisaikaan).

Valintasi näkyy Hälytys-painikkeessa.

4.9.14 Anna muistutus

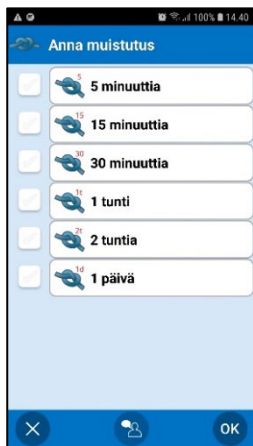

Aseta aktiviteetille yksi tai useampi muistutus.
Valintasi näkyy *Muistutus*-painikkeessa.

4.10 Kello

Kellonäkymä näyttää yleiskuvan päivämäärästä, kellosta ja kellonajasta. *Kellonäkymä* voidaan avata kahdella tavalla:




1. *Kalenteri* -valikossa .
2. Napauttamalla kelloa *Kalenterinäkymässä* (riippuu asetuksista).

Kellonäkymä näytetään asetusten mukaan 5.8 Ajan näyttö).

Analoginen

Digitaalinen

Analoginen ja
digitaalinen

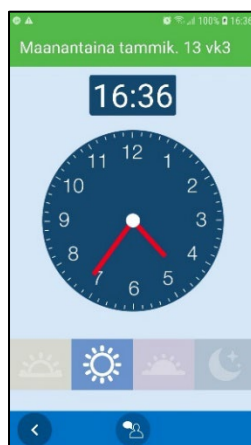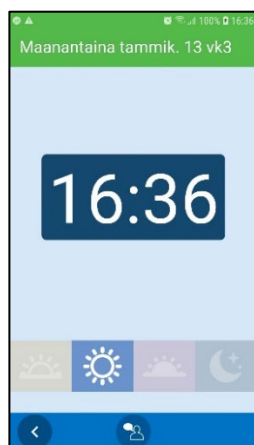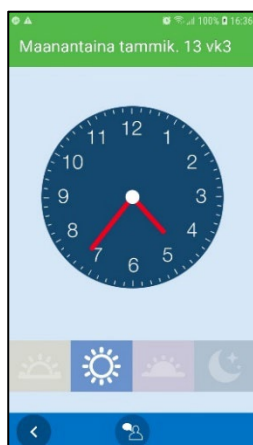

Näet onko aamu, päivä,
ilta vai yö.

Aamu 06-10

Päivä 10-18

Ilta 18-23

Yö 23-06.

4.11 Hae aktiviteetti



Hae aktiviteetteja *Kalenterivalikosta*. Näkyviin tulee seuraava opas:




Kirjoita hakusana ja napauta
OK.

Jos osuma on toistuvissa
aktiviteeteissa, näkyviin tulee
oikealla oleva näkymä.
Muussa tapauksessa
hakutulokset näytetään
suoraan.

Napauta haluttua aktiviteettia
nähdäksesi tiedot
Aktiviteettinäkymässä.

Jos aktiviteettia ei löydy,
näytetään viesti.

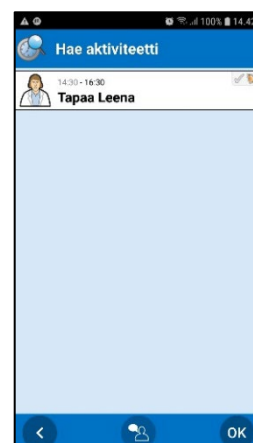

5. Asetukset-valikko



HandiCalendarin asetuksia hallitaan *Asetukset-valikossa*, joka avataan *Kalenterivalikosta*.

Lyhyt kuvaus määritettyjen asetusten sivun avaamiseksi esitetään seuraavassa muodossa: **Asetukset|Kalenterinäkymä**. Se tarkoittaa ”Ava *Kalenterivalikko*, valitse *Asetukset-valikko* ja sitten *Kalenterinäkymä*”.

5.1 Koodisuojaus

Jos käytät *Asetukset-valikossa* suojakoodia, voit estää tahattomat muutokset asetuksiin.




Voit valita kohdassa **Asetukset|Koodisuojaus** ”Suoja *asetukset koodilla*”. Voit myös asettaa oman koodin.



Ava *Asetukset-sovellus* laitteen aloitusnäytössä, valitse *HandiCalendar* ja sitten ”*Salasanan suojasetukset*”. Koodi on 0353 eikä sitä voi vaihtaa.

5.2 Kalenterinäkymä

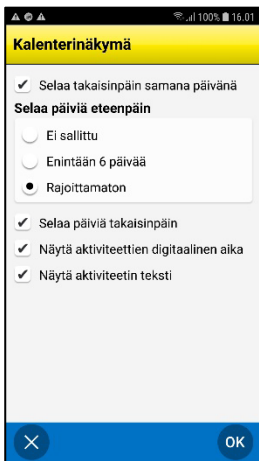



Voit valita kohdassa **Asetukset|Kalenterinäkymä**, asetukset kohtaan *Kalenterinäkymä*, katso luku 4.1 *Kalenterinäkymä*.

Eri asetukset on kuvattu seuraavassa.


5.2.1 Selaa takaisinpäin samana päivänä

Kun asetusta ”Selaa takaisinpäin samana päivänä” ei ole valittu, et voi nähdä saman päivän aikaisempia aktiviteetteja.


5.2.2 Selaa päiviä eteenpäin ja Selaa päiviä takaisinpäin

Kun asetuksia ”Selaa päiviä eteenpäin” ja ”Selaa päiviä takaisinpäin” ei ole valittu, *Selaa-*painikkeet  ja  ovat piilotettuna *Kalenterinäkymässä*. ”Selaa päiviä eteenpäin” voidaan asettaa siten, että voit selata enintään 6 päivää eteenpäin tai rajoittamattoman määrän päiviä eteenpäin.

5.2.3 Näytä aktiviteettien digitaalinen aika

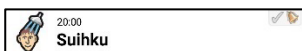


Kun ”Näytä aktiviteettien aika” on valittu, se näyttää samalta kuin yllä oleva kuva.

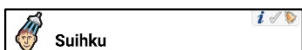

Kun ”Näytä aktiviteettien aika” -asetusta ei ole valittu, se näyttää samalta kuin alla oleva kuva.

5.2.4 Näytä aktiviteetin teksti

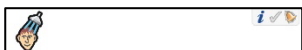

Jos ”Näytä aktiviteetin teksti” -asetusta ei ole valittu, aktiviteettikentässä ei näy tekstiä.

Tekstin, joka ei ole näkyvissä voi silti lukea ääneen puhesynteesillä.


5.2.5 Aikapylväsasetukset (iOS)



iOS-käyttöjärjestelmässä on muutamia lisäasetuksia *Kalenterinäkyessä*:




- *Aloituspäivä*. Valitse onko aloitusnäytteenä Aikapylväs, Listanäkymä, Viikkonäkymä vai Kuukausinäkymä.
- *Näytä kalenterissa pikavalikko*. Valitse haluatko vaihtaa kalenterinäkyymiä yksinkertaisesti *Kalenteri -valikon* asemesta.
- *Zoomaus*. Aseta Aikapylväs näkymä suurena tai pienenä zoomauksena. Pienellä zoomilla näet suuremman osan päivästä mutta pienemmät kuvat ja tekstin. Suurella zoomilla näet suuremmat kuvat ja tekstin mutta pienemmän osan päivästä.
- *Näytä QHW*. Valitse tämä, jos haluat nähdä neljännestantipisteet kohdassa Aikapylväs näkymä.

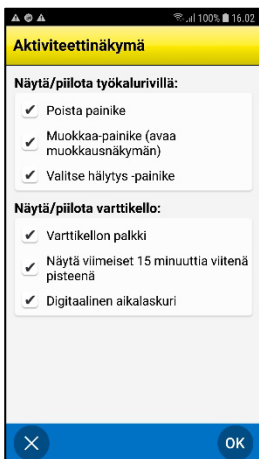5.3 Aktiviteettinäkymä




Voit valita kohdassa **Asetukset** | **Aktiviteettinäkymä** asetukset Aktiviteettinäkymään, katso luku 4.2 .

Näytä tai piilota

- *Poista-painike*. Piilota  estääksesi käyttäjää poistamasta tärkeitä aktiviteetteja kalenterista.
- *Muokkaa-painike*. Piilota  estääksesi käyttäjää muokkaamasta aktiviteetteja kalenterissa.
- *Hälytys-painike*. Piilota  estääksesi käyttäjää muuttamasta aktiviteettien hälytystyyppiä kalenterissa.


Näytä tai piilota varttikello

- *Varttikellon palkki*. Aktiviteetin alkuun tai päättymiseen jäljellä oleva aika näytetään pisteinä.
- *Viimeiset 15 minuuttia viitenä pisteinä*. Alin varttituntipiste on jaettu 5 pieneen pisteeseen, joista jokainen vastaa 3 minuuttia. Tämä tuottaa tarkemman aikanäytön juuri ennen aktiviteetin alkua.
- *Digitaalinen aikalaskuri*. Aktiviteetin alkuun tai päättymiseen jäljellä oleva aika näytetään.

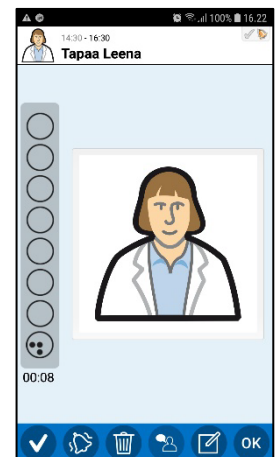

5.4 Lisää aktiviteetti

Voit valita kohdassa **Asetukset| Lisää aktiviteetti** tavan, jolla uudet aktiviteetit lisätään.

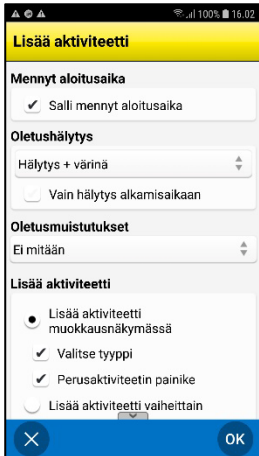

Käytettävissä on kaksi päävaihtoehtoa:

- Lisää aktiviteetti Muokausnäkyssä
- Lisää aktiviteetti vaihe vaiheelta

Kaksi tapaa on kuvattu kohdassa **4.4 Lisää aktiviteetti**.

Kun olet valinnut päävaihtoehdon, tapaa voi muokata lisää. Katso asetukset asetukset-sivulta.

5.4.1 Salli mennyt aloitusaika

Valitse onko mahdollista lisätä aktiviteetteja menneeseen aikaan.

5.4.2 Oletushälytys

Valitse mikä hälytystyyppi valitaan ennalta, kun aktiviteetti lisätään.



Valitse seuraavista vaihtoehdoista:

- Hälytys + värinä
- Hälytys
- Värinä
- Äänetön hälytys
- Ei hälytystä
- Vain hälytys alkamisaikaan



Valitse seuraavista vaihtoehdoista:

- Hälytys
- Äänetön hälytys
- Ei hälytystä
- Vain hälytys alkamisaikaan


Miten hälytys annetaan ja sen ääniasetukset määritetään laitteen ääniasetuksissa. Jos laite tukee värinää ja tämä valitaan laitteen ääniasetuksissa, HandyCalendarin *hälytys* värisee.

5.4.3 Oletusmuistutukset (Android)




Valitse mitkä muistutukset valitaan ennalta, kun lisätään aktiviteetti. (5 minuuttia, 15 minuuttia, 30 minuuttia, 1 tunti, 2 tuntia, 1 päivä)

5.5 Muokkausnäky

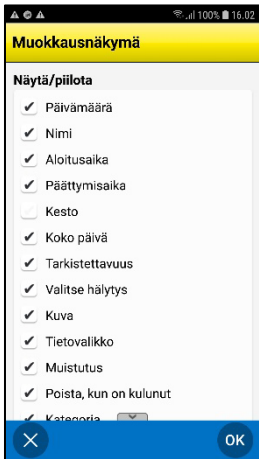

Voit valita kohdassa **Asetukset**|**Muokkausnäky** mitkä painikkeet näytetään Muokkausnäkyssä, katso 4.9 *Muokkausnäky*.

5.6 Tietovalikko

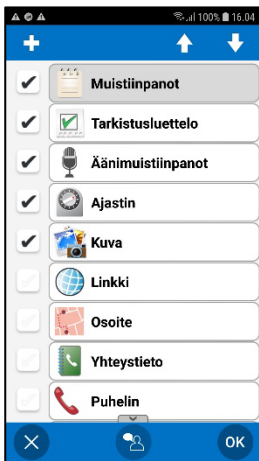


Voit valita kohdassa **Asetukset**|**Tietovalikko** mitä näytetään tietovalikossa, katso luku


4.9.12 Tietovalikko.




Voit valita  painikkeella kolmannen osapuolen sovelluksen lisäämisen tietovalikkoon.


Voit valita tietovalikon järjestyksen merkitsemällä halutun kohteen tai sovelluksen ja napauttamalla *Siirrä ylös* tai *Siirrä alas* (painikkeet näytetään yläreunassa, kun rivi on merkitty). Kun kolmannen osapuolen sovellus on merkitty, sen voi poistaa tietovalikosta napauttamalla .

5.7 Kalenterivalikko

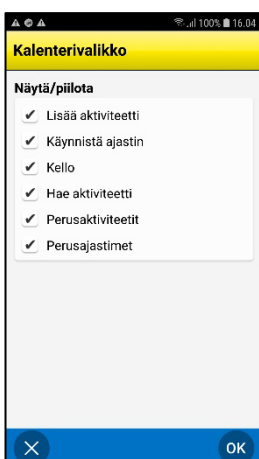

Voit valita kohdassa **Asetukset**|**Kalenterivalikko**  Kalenterinäkyvän käytettävissä olevat toiminnot.

5.8 Ajan näyttö

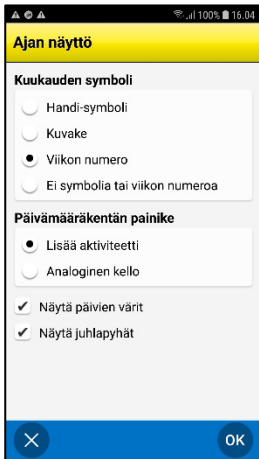


Voit valita kohdassa **Asetukset|Ajan näyttö** seuraavat mukautukset:

- Näytä analoginen kello tai lisää aktiviteettipainike päivämääräkentässä
- Näytä kuukauden symboli tai viikon numero päivämääräkentässä
- Näytä viikonpäivien vakiovärit
- Näytä juhlapyhät

Asetukset on kuvattu seuraavassa.


5.8.1 Päivämääräkentän painike

Lisää aktiviteetti -
painike

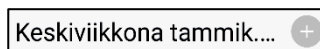

Kun napautat painiketta, Lisää aktiviteetti -
opas avautuu, katso [4.4 Lisää aktiviteetti](#) 4.4 .

Analoginen kello

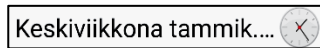


Kun napautat kelloa, kellonäkymä avataan,
katso [4.10 Kello](#).

5.8.2 Kuukauden symboli

Handi-symboli




Viikon numero

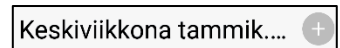

Kuvasymboli



Ei kuukauden
symbolia tai viikon
numeroa

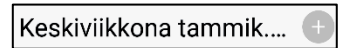


5.8.3 Näytä viikonpäivien värit

Viikonpäivien vakiovärit ovat: vihreä maanantai, sininen tiistai, valkoinen keskiviikko, ruskea torstai, keltainen perjantai, pinkki lauantai ja punainen sunnuntai.

Viikonpäivien värit


Ei viikonpäivien värejä

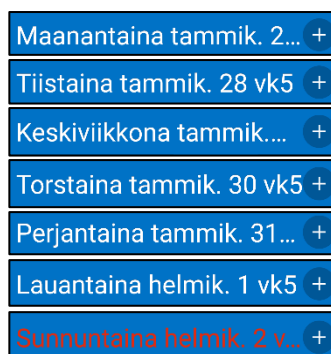

5.8.4 Näytä juhlapyhät

Kun "Näytä lomapäivät" on valittu, kaikki julkiset lomapäivät näytetään, kuten luvussa [4.1.6 Julkiset lomapäivät](#).

5.9 Aikasyöte (Android)

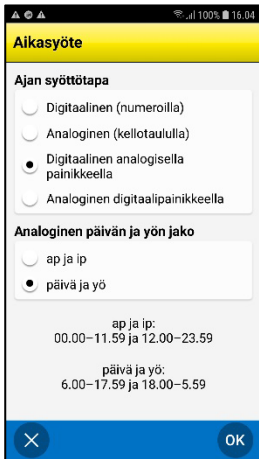


Voit määrittää kohdassa **Asetukset|Aikasyöte** aikasyötteen asetukset. Määritä annetaanko aika digitaalisesti käyttämällä numeroita vai analogisesti kellotaulun avulla. Voit myös asettaa painikkeen vaihtamaan syötteen ”muu tapa”.

Jos käytät analogista syötettä, voit määrittää jaetaanko päivä 12 tunnin (am/pm) näyttöön vai päivän/yön näyttöön.


Asetukset on kuvattu seuraavassa.

5.9.1 Ajan syöttötapa


*Digitaalinen
(numeroilla)*

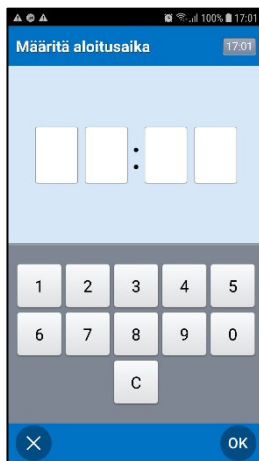


*Analoginen
(kellotaululla)*

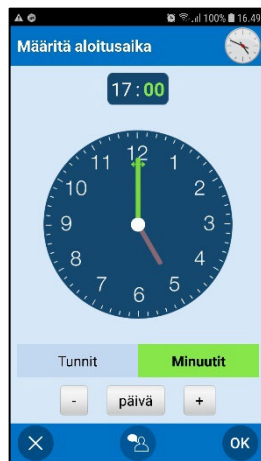

*Digitallinen
analogisella
painikkeella*

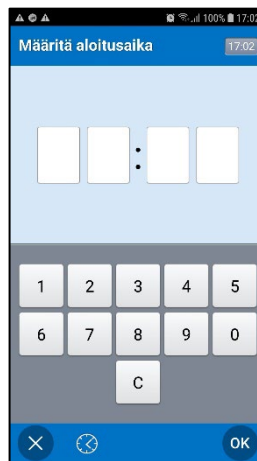

*Analoginen
digitaalipainikkeella*

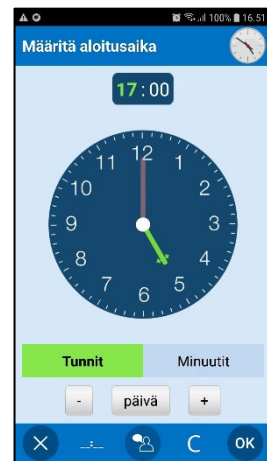


5.9.2 Analoginen päivän ja yön jako

Voit valita seuraavista asetuksista:

- Vakiotapa 12 tunnin kellolle. 00:00–23:59 ja 12:00–23:59.
- **Päivä ja yö.** Yksinkertaistettu tapa. 06:00–17:59 ja 18:00–05:59.

5.10 Kellonäkymä

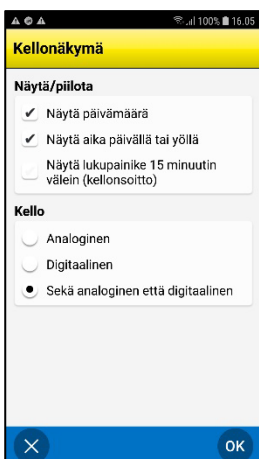

Kellonäkymää voi mukauttaa kohdassa **Asetukset|Kellonäkymä**:

Päivämäärä
Digitaalinen kello
Analoginen kello
Kellonaika





Lukupainike 15 minuutin välein (kellonsoitto)



-painike on käytettävissä työkalurivillä. Katso kohdasta 4.10 Kello toiminnon kuvaus.


5.11 Kuukausinäkymä



Voit valita kohdassa **Asetukset|Kuukausinäkymä** merkitäänkö toistuvat aktiviteetit kuukausinäkymässä (pienet mustat neliöt joka päivä).

Jos sinulla on useita toistuvia aktiviteetteja, suositus on että toimintoa ei aktivoida.

5.12 Viikkonäkymä

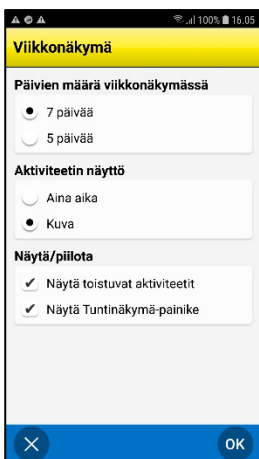


Voit valita kohdassa **Asetukset|Viikkonäkymä** seuraavat viikkonäkymän asetukset:

- *Päivien määrä viikkonäkymässä.* 7 päivää (maanantai-sunnuntai) tai 5 päivää (maanantai-perjantai).
- *Aktiviteetin näyttö.* "Aina aika" tarkoittaa, että aktiviteetti näytetään aina alkamisajan kanssa, vaikka sillä olisi kuva.
- *Näytä toistuvat aktiviteetit.* Älä valitse sitä, jos haluat piilottaa toistuvat aktiviteetit Viikkonäkymässä.



Näytä Tuntinäkö-painike. Vaihda tuntinäyttöön napauttamalla . Tämä tarkoittaa, että voit asettaa vapaa/varattu-ajat suunniteltujen aktiviteettien sijaan.

5.13 Käynnistä ajastin

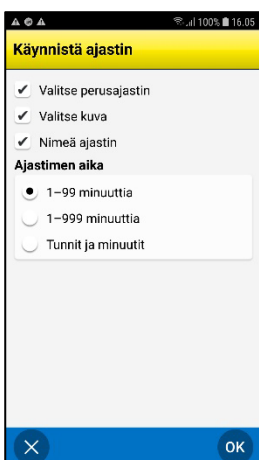

Valitse kohdassa **Asetukset|Käynnistä ajastin** mitkä asetukset näytetään kohdassa *Käynnistä ajastin* (katso luku

4.6 *Käynnistä ajastin*):


- Valitse perusajastin
- Valitse kuva
- Nimeä ajastin

Voit myös valita ajastinajan syöttötavan "Aikalaskurin aika" -näkyssä, katso seuraava.

5.13.1 Ajastimen aika

”Aikalaskurin aika” -näköymlä voidaan täyttää kolmella eri tavalla:

- 1–99 minuuttia. Maks. 2 numeroa.
- 1–999 minuuttia. Maks. 3 numeroa.
- Tunnit ja minuutit. Maks. 4 numeroa, jossa kaksi vasenta vastaa tunteja ja kaksi oikeaa vastaa minuutteja.

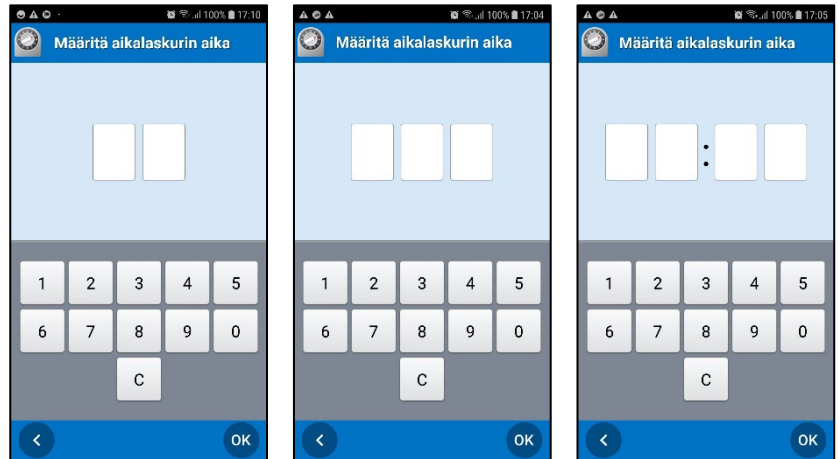


5.14 Perusaktiviteetit



Voit määrittää perusasetukset ja kansiot kohdassa **Asetukset| Perusaktiviteetit**. Sen voi tehdä myös myAbiliassa.

Napauta yläosan painikkeita luodaksesi perusaktiviteetin tai kansion tai muokataksesi tai poistaaksesi sen:

 **Uusi-painike**. Jos olet ylätasolla, eli et ole kansiossa, voit valita luodaanko uusi perusaktiviteetti tai kansio.

 **Muokkaa-painike**. Valitse ensin muokattava kohde.


 **Poista-painike**. Valitse ensin poistettava kohde.

Piilota/näytä aktiviteetti kohdassa 4.4.2.3 *Valitse perusaktiviteetti*.



5.15 Perusajastimet

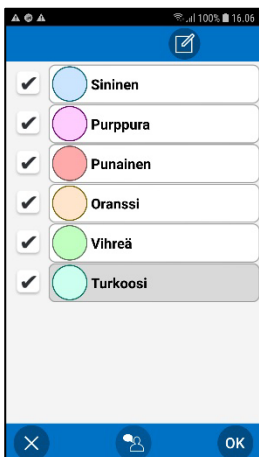

Määrität perusajastimet kohdassa **Asetukset| Perusajastimet**. Perusajastimet ja kansiot luodaan ja niitä muokataan samoin kuin kohdassa 5.14 *Perusaktiviteetit*.

5.16 Katgoria



Kohdassa **Asetukset|Kategoria**, voit mukauttaa luokkanimiä ja listassa näytettävät luokat.


 Merkitse luokka ja muokkaa sen nimeä -painikkeella. Valitse näytettävät aktiviteetit valitsemalla niiden ruudut.

 Merkitse luokka ja -painike näytetään. Valitse *Muokkaa* tai *Piilota/näytä*.

5.17 Hälytysääni

Kohdassa **Asetukset**|**Hälytysääni** voit valita HandiCalendarin hälytyssignaalin. Android ja iOS eroavat toiminnoiltaan, katso kuvaus seuraavasta.

5.17.1 Hälytysääniasetukset Android-sovelluksessa

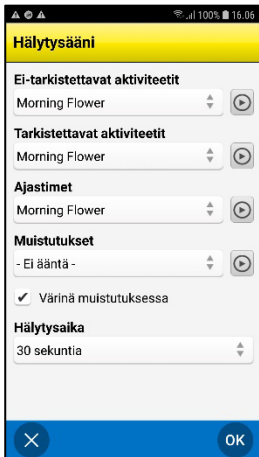


Voit valita eri äänet asetuksiin *Ei-tarkistettavat aktiviteetit*, *Tarkistettavat aktiviteetit*, *Ajastimet* ja *Muistutukset*.

Valitse hälytysääni listasta ja testaa sen Toisto-painikkeella.

Asetuksessa *Muistutukset* voit valita vaihtoehdon *Ei ääntä* ja valita *värinän*.

Hälytysaika, eli aika jolloin hälytys ja muistutukset kuuluvat/värisyvät, voidaan asettaa seuraavasti: *Signaali*, *15 sekuntia*, *30 sekuntia*, *1 minuutti*, *2 minuuttia* ja *5 minuuttia*. ("Signaali" toistaa äänen kerran tai maks. 5 sekuntia.)

5.17.2 Hälytysääniasetukset iOS-sovelluksessa

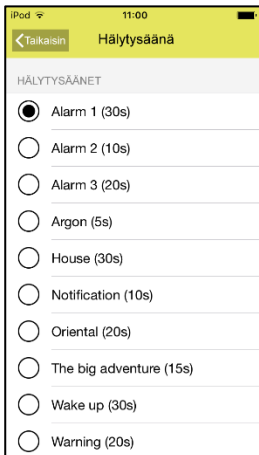


Koska iOS-käyttöjärjestelmässä on rajoituksia hälytysten osalta, iOS-sovelluksessa on vähemmän asetuksia kuin Android-sovelluksessa.

Samaa hälytysääntä käytetään kaikille aktiviteeteille.


Hälytysaika, eli milloin hälytys ja muistutukset soivat/värisyvät, ovat hälytysääneen sidottuja. Aika ilmoitetaan suluissa hälytysäänen nimen jälkeen.

Valitse hälytysääni listasta ja se näytetään, jos laitteen äänet on käytössä (ei hiljaisessa tilassa).


5.18 Hälytysnäkyvä (Android)

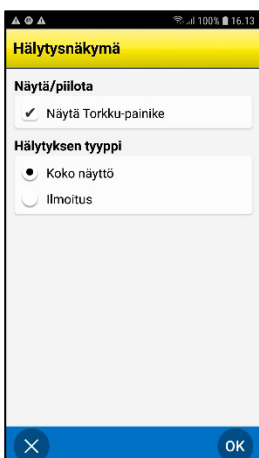

Voit valita kohdassa **Asetukset**|**Hälytysnäkyvä**, hälytyksen toimintatavan:


- *Koko näyttö*. Näyttää hälytyksen koko näytössä.
- *Ilmoitus*. Näyttää hälytyksen ilmoituksen riippuen laitteen ilmoitusasetuksista. Ilmoitukset voi näyttää myös älykellossa.
- *Näytä Torkku-painike*.  näkyy hälytysnäkyvässä. Kun napautat *torkkupainiketta*, hälytysnäkyvä suljetaan ja hälytys siirtyy 5 minuuttia.

5.19 Synteettinen puhe

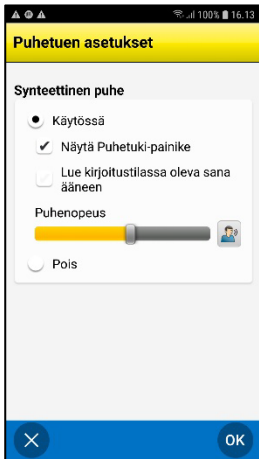

Voit kohdassa **Asetukset|Synteettinen puhe|Puhetuen asetukset** mukauttaa synteettisen puheen asetuksia.

Ensimmäinen ääni täytyy olla ladattuna laitteeseen (Wi-Fi tarvitaan). Katso käytettävissä olevat äänet listasta. Sen jälkeen puhetukea voi mukauttaa:

- *Näytä Puhetuki-painike.* Puhetuki-painike  näytetään HandiCalendarin eri näkymissä.
- *Lue kirjoitustilassa oleva sana ääneen.* Sanat luetaan ääneen samalla, kun kirjoitat ne näppäimistöllä. Viimeinen kirjoitettu sana luetaan ääneen heti, kun paina välilyöntiä.
- *Pois.* Muuta puheen nopeutta säätämällä asteikkoa.

5.20 Lokit (Android)



Voit hallita lokitiedostoja kohdassa **Asetukset |Lokit**. Lokitiedostot muodostetaan taustalla ja niitä käytetään pääasiassa vianmääritykseen.

Lokitiedostot tallennetaan automaattisesti laitemuistiin, eivätkä ne ole käytettävissä.

Jos valitset **Lataa palvelimeen**, lokitiedostot ladataan Abilian tukipalvelimella puhelinverkon tai Wi-Fin välityksellä.

5.21 Tietoja HandiCalendarista (Android)



Kohdassa **Asetukset|Tietoja HandiCalendarista** näytetään laitteen ohjelmistoversio, laitetunnus ja tietoja. Täältä löydät myös *Lisenssiavaimen* lisenssin päättymispäivän.

5.22 Kirjaudu ulos

Voit kirjautua HandiCalendarista ulos kohdassa **Asetukset|Kirjaudu ulos**. Jos kirjautut ulos, kaikki HandiCalendarin tiedot häviävät laitteesta. Nämä tiedot on kuitenkin tallennettu käyttäjän myAbilia-tilille. Seuraavan kerran HandiCalendariin kirjautuessasi näkyviin tulee HandiCalendarin sisäänkirjautumisnäyttö ja voit kirjautua jälleen sisään.

6 HandiCalendar Apple Watch (iOS) -älykellossa



Koskee vain iOS-käyttöjärjestelmää

6.1 Toiminnot

HandiCalendarissa on seuraavat toiminnot, kun se on asennettu Apple Watch -älykelloon:

- Kalenterin kuvatuki
- Lista päivän aktiviteeteista
- Aktiviteettinäkymä ja visuaalinen aikatuki (Varttikelloperiaate)
- Muokattu hälytysnäkymä

Voit valita aktiviteetin tarkistetuksi kellosta. Kellossa ei näytetä yhdistettyjä toimintoja kuten tarkistuslistaa.

Kellon toiminnot noudattavat Applen ohjeita: Kello on tarkoitettu täydentämään puhelinta, ei matkimaan sitä. Painopiste on käyttäjän eniten tarvitsemissa toiminnoissa silloin, kun puhelin ei ole käytettävissä.

6.2 Apple Watchin hälytykset

HUOMAA: Apple Watch on liitettävä iPhoneen, jotta hälytyksiä voidaan näyttää.

- Hälytys (ääni/värinä) kuuluu kellosta, kun puhelimen näyttö on sammutettu
- Jos vahvistat ilmoituksen kellossa, se vahvistetaan myös puhelimessa

6.3 Asennus

HandiCalendar ladataan Apple Watchiin puhelimesi **Watch**-sovelluksella:

- **Ilmoitukset.** Valitse HandiCalendar ja sitten "Peilaa iPhone-hälytykset".
- **HandiCalendar.** Valitse "Näytä sovellus Apple Watch -älykellossa".

7. Oletusasetukset

Kun HandiCalendar käynnistetään ensimmäisen kerran, se tapahtuu seuraavassa mainituilla asetuksilla.

HandiCalendar			Valittu
Koodisuojaus 	Koodi		0353
	Suojaa asetukset koodilla		
Kalenterinäkymä	Aloituskäytännö 	Aikapylväsnäkymä	X
		Luettelonäkymä	
		Viikkonäkymä	
		Kuukausinäkymä	
		Näytä kalenterissa pikavalikko	X
	Zoomaustaso 	Pieni	X
		Suuri	
	Selaa takaispäin samana päivänä		X
	Selaa päiviä eteenpäin	Ei sallittu	
		Enintään 6 päivää	
		Rajoittamaton	X
	Selaa päiviä takaisinpäin		X
	Näytä aktiviteettien digitaalinen aika		X
	Näytä aktiviteetin teksti		X
	Näytä QHW 		X
Aktiviteettinäkymä	Näytä/piilota työkalurivillä	Poista painike	X
		Muokkaa-painike	X
		Valitse hälytys -painike	X
	Näytä/piilota varttikello	Varttikellon palkki 	X
		Näytä viimeiset 15 minuuttia viitenä pisteenä	X
		Digitaalinen aikalaskuri	X
Lisää aktiviteetti	Mennyt aloitusaika	Salli mennyt aloitusaika	X
	Oletushälytys	Hälytys + värinä	X
		Hälytys	
		Värinä	
		Äänetön hälytys	
		Ei hälytys	
		Vain hälytys alkamisaikaan	
	Oletusmuistutukset	5 minuuttia	X
		15 minuuttia	
		30 minuuttia	
		1 tunti	
		2 tuntia	
		1 päivä	
	Lisää aktiviteetti muokkautumassa		X
		Valitse tyyppi	X
		Perusaktiviteetin painike	X
	Lisää aktiviteetti vaiheittain		
		Aseta päivämäärä	X
		Valitse tyyppi	X
		Valitse perusaktiviteetti	X
		Valitse kuva	X
		Nimeä aktiviteetti	X
		Tietovalikko	X

		Poista, kun on kulunut	X
		Valitse tarkistettavuus ja hälytys	X
		Valitse kategoria	X
		Käytettävissä	X
		Anna muistutus	X
		Anna kesto	
		Määritä päättymisaika	X
Muokkausnäkö	Näytä/piilota	Päivämäärä	X
		Nimi	X
		Aloitusaika	X
		Päättymisaika	X
		Kesto	
		Koko päivää	X
		Tarkistettavuus	X
		Valitse hälytys	X
		Kuva	X
		Tietovalikko	X
		Muistutus	X
		Poista, kun on kulunut	X
		Kategoria	X
		Käytettävissä	X
Tietovalikko	Näytä/piilota	Muistiinpanot	X
		Tarkistusluettelo	X
		Äänimuistiinpanot	X
		Ajastin	X
		Kuva	X
		Linkki	
		Osoite	
		Yhteystieto	
		Puhelin	
		Tekstiviesti	
Kalenterivalikko	Näytä/piilota	Lisää aktiviteetti	X
		Kuukausinäkö 	X
		Viikkonäkö 	X
		Käynnistä ajastin	X
		Kello	X
		Hae aktiviteetti	X
		Perusaktiviteetit	X
		Perusajastimet	X
Ajan näyttö	Kuukauden symboli	Handi-symboli	
		Kuvake	
		Viikon numero	X
		Ei symboli tai viikon numeroa	
	Päivämääräkentän painike	Lisää aktiviteetti	X
		Analoginen kello	
	Näytä viikonpäivien värit		X
	Näytä juhlapyhät		X
Aikasyöte 	Ajan syöttötapa	Digitaalinen (numeroilla)	X
		Analoginen (kellotaululla)	
		Digitaalinen analogisella painikkeella	
		Analoginen digitaalipainikkeella	
	Analogin päivän ja yön jako	ap ja ip	X
		Päivä ja yö	

Kellonäkymä	Näytä/piilota	Päivämäärä	X
		Kellonaika	X
		Näytä lukupainike 15 minuutin välein (kellonsoitto) 	
	Kello	Analoginen	X
		Digitaalinen	
		Sekä analoginen että digitaalinen	
Kuukausinäkymä	Määritä jaksottaiset aktiviteetit		X
Viikkonäkymä	Päivien määrä viikkonäkymässä	7 päivää	X
		5 päivää	
	Aktiviteetin näyttö	Aina aika	
		Kuva	X
	Näytä/piilota	Näytä toistuvat aktiviteetit	X
		Näytä Tuntinäkymä-painike	
Käynnistä ajastin	Valitse perusajastin		X
	Valitse kuva		X
	Nimeä ajastin		X
	Ajastimen aika	1-99 minuuttia	X
		1-999 minuuttia	
		Tunnit ja minuutit	
Kategoria	Sininen		X
	Purppura		X
	Punainen		X
	Oranssi		X
	Vihreä		X
	Turkoosi		X
Hälytysääni		Ei-tarkistettavat aktiviteetit	<i>Puhelin</i>
		Tarkistettavat aktiviteetit	<i>Puhelin</i>
		Ajastimet	<i>Puhelin</i>
		Muistutukset	Ei ääntä
		Värinä muistutuksessa	X
		Hälytysaika	30 s
Hälytysnäkymä 	Näytä/piilota	Näytä Torkku-painike	X
	Hälytyksen tyyppi	Koko näyttö	X
		Ilmoitus	
Puhetuen asetukset	Käytössä/Pois		Käytössä
	Näytä Puhetuki-painike		X
	Lue kirjoitustilassa oleva sana ääneen		
	Puhenopeus		keskikokoinen

8 Tekninen informaatio

8.1 Mukana tulevat osat

Tuotenro	Nimi	Kuvaus	Määrä
	Kuponki	Lisenssiavaimella	1 kpl
	Käyttöohjeet	Introduction HandiCalendar, Käsikirja HandiCalendar	2 kpl

8.2 Tekniset tiedot

Yhteensopivat järjestelmät	Kaikki Android-laitteet (Android). iPhone, iPad ja iPod Touch, mukaan lukien sovellus Apple Watchille (iOS).
Käyttöjärjestelmä	Android-versio 5.0 tai uudempi. iOS-versio 10.0 tai uudempi.
Internet-selain	Kaikki Internet-selaimet (myAbilia). Internet Explorer edellyttää versiota 11.

Me autamme!

Jos haluat uusimmat käyttöohjeet, skannaa QR-koodi älypuhelimesi kameralla.



Yhteystiedot:

Ruotsi:

Abilia AB, Råsundavägen 6, 169 67 Solna, Ruotsi
Puhelin +46 (0)8-594 694 00 | info@abilia.se | www.abilia.se

Norja:

Abilia AS, Tevlingveien 23, 1081 Oslo, Norja
Puhelin +47 23 28 94 00 | info@abilia.no | www.abilia.no

Yhdistynyt kuningaskunta:

Abilia UK Ltd, Unit 12 Buckingham Business Park, Swavesey,
Cambridge, CB24 4AE, Yhdistynyt kuningaskunta
Puhelin +44 (0)1954 281210 | info@abilia.uk | www.abilia.uk

Kansainvälinen:

www.abilia.com/intl/get-products/distributors

