




# Kirurginen suu-nenäsuojus tyyppi IIR ANTI-FOG kiinnityslenkeillä

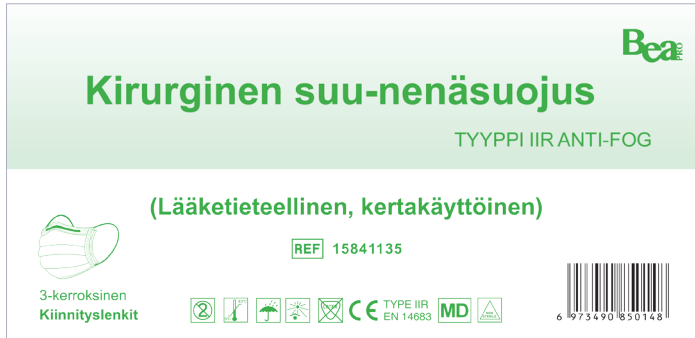

Erittäin hyvin istuva ja hengittävä kolmikerroksinen PP-kuitukankaasta valmistettu tyyppi IIR suu-nenäsuojus muotoiltavalla nenäosalla, huurtumisestolla ja korvien taakse kiinnitettävillä joustavilla lenkeillä. Korkean suodatuskapasiteetin omaava suu-nenäsuojus täyttää standardin SFS EN 14683:2019 suodatustehokkuusvaatimuksen ja suojaa käyttäjäänsä roiskeilta. Hypoallergeeninen suu-nenäsuojus on lasikuiduton ja lateksiton.

## Käyttökohde

Lääketieteellinen, kauneus-, teollisuus- ja muu ala

## Käyttöohjeet



Pese tai desinfioi kädet ennen kuin asetat puhtaan suu-nenäsuojuksen kasvoille. Aseta suu-nenäsuojus kasvoille korvien taakse asetettavilla kiinnityslenkeillä niin, että nenä ja suu peittyvät. Älä koske suu-nenäsuojuksen pintaan ennen kuin suojuus on puettu päälle. Muotoile suu-nenäsuojus nenän juureen tiiviisti siten, että nenä peittyy sen alle ja vedä suojuksen alareuna leuan alle. Älä kosketele suojusta käytön aikana. Pese kädet ennen kuin poistat suu-nenäsuojuksen tarttumalla kiinnityslenkkeihin. Älä koske suojuksen pintaan. Pese tai desinfioi kädet suu-nenäsuojuksen riisumisen jälkeen ja hävitä käytetty suojuus.

## Tuotenumero, pakkauskoko ja EAN

15841135 25 kpl 6973490850148

## Materiaali

100% polypropeenikuitukangasta (sulapuhallettu)

## Väri

Vaaleansininen

## Varastointiohjeet

Säilytettävä kuivassa ja suojusta auringon valolta. Säilytyslämpötila alle 40°C. Kosteusolosuhteet alle 80%.

## Turvallisuus

Suu-nenäsuojus on kertakäyttöinen ja käytön jälkeen suojuus hävitetään sekajätteen mukana.

## Valmistusmaa

Kiina

## Valmistaja

Unimax Trading (HK) Ltd

## Maahantuoja

Berner Oy



20210311

**Berner Pro**

Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki | +358 20 690 761 | pro@berner.fi | berner.fi/pro

**BERNER**