

WHITMYER-PÄÄTUET

YKSILÖLLISET APUVÄLINEET



 WHITMYER®

BERNER

**HUOMISEN
PUOLUSTAJA**









Yli 100 vuoden
kokemuksella

PLUSH-PÄÄTUKIJÄRJESTELMÄ

PLUSH-päätuki on yksittäinen päätukityyny, joka tukee pään asentoa takaapäin. Tällainen peruspäätuki on ihanteellinen pyörätuolia tai sen selkäosaa kallistettaessa.

PLUSH-päätukijärjestelmät ovat käytössä erittäin mukavia ja turvallisia. Siihen voidaan liittää sivu- ja etutukia, jolloin se on helposti mukautettavissa käyttäjän muuttuviin tarpeisiin.

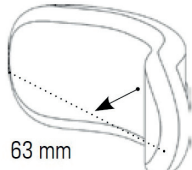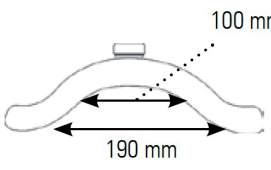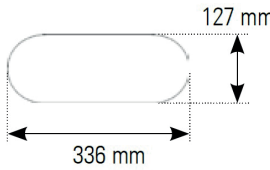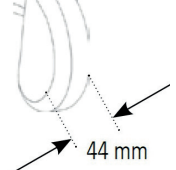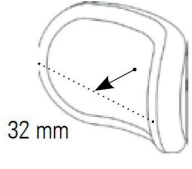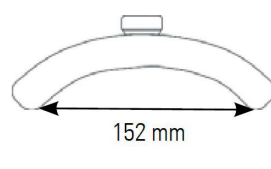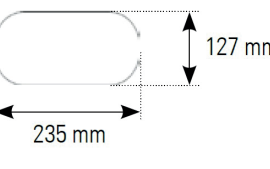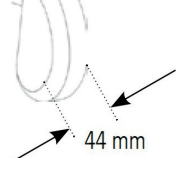







MALLI	TUOTEKOODI	KAAREN SYVYYS	KAAREN LEVEYS	LEVEYS, KORKEUS	PAKSUUS
350 mm Plush	P1400L				
250 mm Plush	P1000L				

Saatavilla myös lasten kokoja.

ADJUST-A-PLUSH-PÄÄTUKIJÄRJESTELMÄ

Adjust-a-PLUSH-päätukijärjestelmä on suunniteltu käyttäjille, joilla on heikko pään hallinta ja jotka tarvitsevat pään pystyasennon säilyttämiseksi lateraalista tukea vähintään toiselta puolelta. Se auttaa kaularangan passiivisen ja aktiivisen sivutaivutuksen hallinnassa ja siinä on kaksi kapenevaa lukittuvaa niveltä, joita voidaan säätää kapeammalle tai leveämmälle maksimaalisen sivutuen saavuttamiseksi. Saatavilla standardi- ja kapea malli.

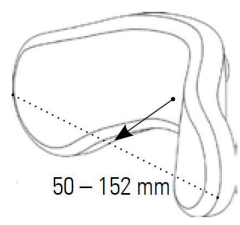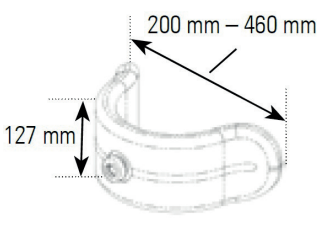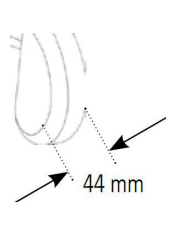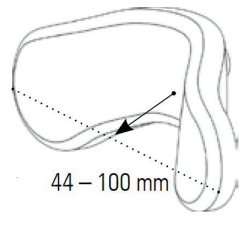
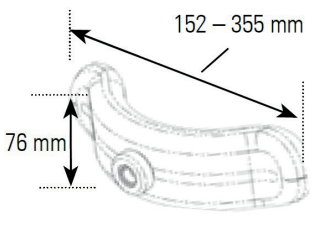
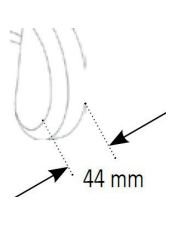


MALLI	TUOTEKOODI	SYVYYS	LEVEYSSÄÄTÖ, KORKEUS	PAKSUUS
Adjust-a-Plush-päätukijärjestelmä standardimalli	P8088L			
Adjust-a-Plush-päätukijärjestelmä Kapea malli	P8044L			

MUOTOILTU KANNATTELEVA PÄÄTUKI


Anatomisen muotonsa ansiosta muotoiltu päätuki tukee pään asentoa erinomaisesti. Suunniteltu kannattelemaan takaraivoa ja antamaan kaularangalle sivusuuntaista tukea, jolloin pään asennon hallintaa voidaan tukea parhaalla mahdollisella tavalla. Päätuki on erittäin mukava ja helposti säädettävissä. Säädettävyytensä ansiosta mahdollistaa maksimaalisen kontaktin tukipintaan, jolloin pään paino jakautuu tasaisesti tuelle.

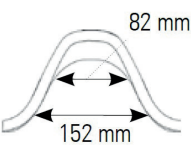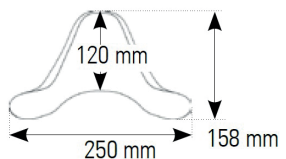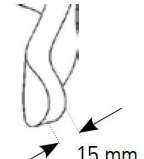













MALLI	TUOTEKOODI	KAAREN SYVYYS	KAAREN LEVEYS	LEVEYS, KORKEUS	PAKSUUS
Muotoiltu kannatteleva päätuki, Medium	P300L				

S.O.F.T.- KOLMITYYNNYINEN PÄÄTUKIJÄRJESTELMÄ

S.O.F.T.-päätukijärjestelmän patentoitu kolmen tyynyn tuki yhdistää kaksi leveys- ja kiertosäädettävää kallonpohjatyynyä säädettävään takaraivotyynyyn, joka mahdollistaa itsenäisen eteen-taakse-liikkeen ja maksimaalisen kontaktin tukipintaan. Kallonpohjatyynyt ovat säädettävissä erikseen, jolloin voidaan mukautua epäsymmetriseen asentoon. Ainutlaatuisen kokoonpanon tarjoama maksimaalinen takaraivon ja proksimaalisen sivusuuntaisen kaularangan tuki mahdollistaa vahvemman asennon hallinnan. Monipuolisuutta voi vielä lisätä liittämällä tukijärjestelmään pään sivu- tai etutukia tai kytkimiä.

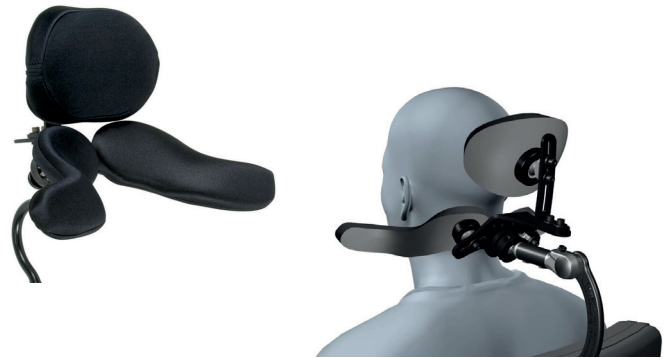









Saatavilla myös pienempiä lasten kokoja.

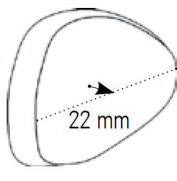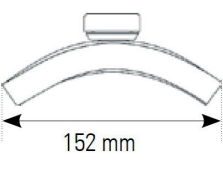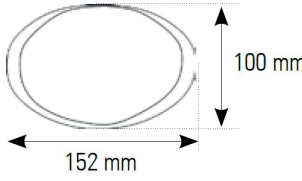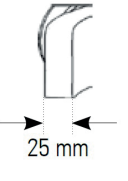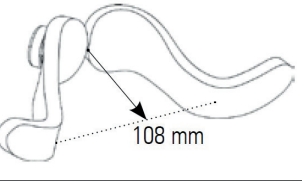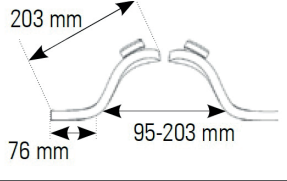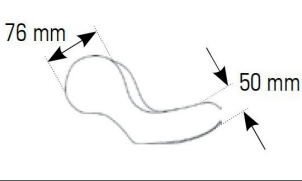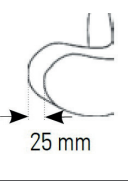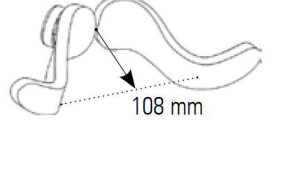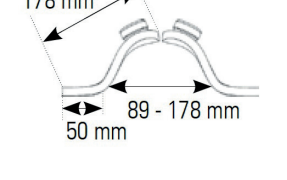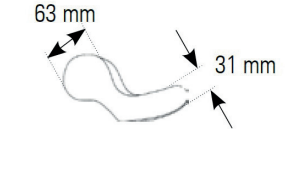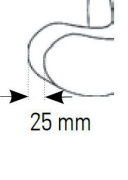MALLI	KOODI	KAAREN SYVYYS	KAAREN LEVEYS	LEVEYS, KORKEUS	PAKSUUS
Takaraivotyyny	P600L				
MALLI	KOODI	KAAREN SYVYYS	LEVEYDET	HALKAISIJAT	PAKSUUS
Kallonpohjatyyny, koko 1	SOFT 1 L				
Kallonpohjatyyny, koko 2	SOFT 2 L				

HEADS UP -PÄÄTUKI

Pyörätuolissa käytettäväksi tarkoitettun Heads Up -päätuen etupuolen stabilisointisiivekkeet tukevat hartioita ja vartaloa etu- ja sivusuunnassa ihanteellisen pään hallinnan saavuttamiseksi. Siivekkeet kääntyvät ulospäin, mikä helpottaa siirtymisissä säilyttäen samalla hyvän pään tuennan. Siivekkeiden alaosat voidaan säätää erilaisille vartaloille sopiviksi.

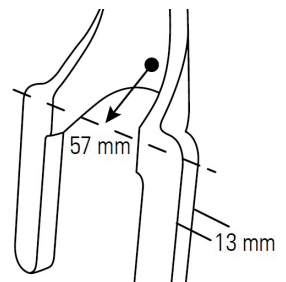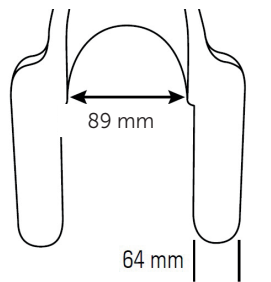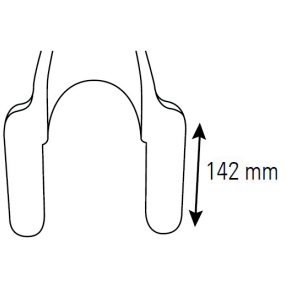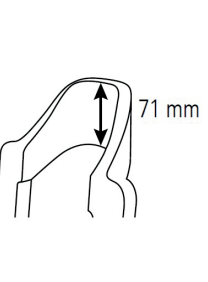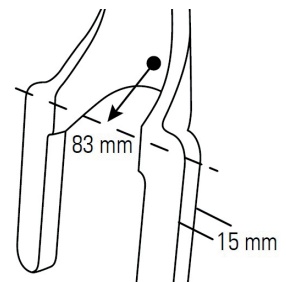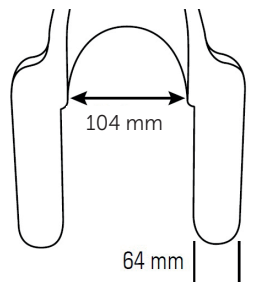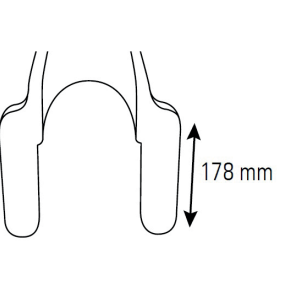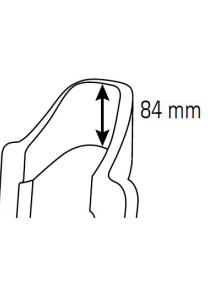

MALLI	KOODI	SYVYYS JA PAKSUUS	SIIVEKKEIDEN ETÄISYYS JA LEVEYS	SIIVEKKEEN PITUUS	KORKEUS
Päätuoli Heads Up, koko S	STSSL				
Päätuoli Heads Up, koko M	MTSSL				

PÄÄN SIVUTUET

Sivutuet voidaan säätää pään sivutai-vutuspoikkeamien ja/tai kierron mukaisiksi tai estämään niitä. Tuet toimivat yleisenä tukipintana tai kytkinten sijoituspaikkana kaularangan yläpuolella. Ne voidaan kääntää pois tieltä siirtymisten ajaksi tai kun niitä ei tarvita. Kaartuvien pallonivelellisten tankojen avulla tukityyny voidaan sijoittaa pään sivuille tai eteen.



TUOTE	TUOTEKOODI
Pään sivutuet Plush-päätuokiin	LM + PL15L + LM-PL
Pään sivutuet muotoiltuun päätukeen	LM + PL15L + LM-CCS

OTSAPANTA DFS-JÄRJESTELMÄ

Dynaaminen otsapantajärjestelmä tukee pään pystyasentoa estämättä pään kiertoliikettä. Käy mihin tahansa pallonivelelliseen päätukimalliin.

TUOTE	TUOTEKOODI
Otsapanta DFS-järjestelmä	DFS1




AXYS-KIINNITYSJÄRJESTELMÄ

AXYS-kiinnitysjärjestelmä on hyväksi todettu, taloudellinen osavaihtoehto. Musta kromiviimeistely yhdistettynä pieniprofiliseen teräksiseen neliötankoon tekee kiinnitysjärjestelmästä kompaktin ja hyvännäköisen.

Kiinnitysjärjestelmä on yhteensopiva kaikkien Whitmyer-osien kanssa ja se on suunniteltu helposti säädettäväksi ja mukautettavaksi. Sopii 13x13 kiinnityspotkeen. Sisältää kiinnikkeen.

TUOTE	TUOTEKOODI
AXYS-kiinnitysjärjestelmä	AXYS

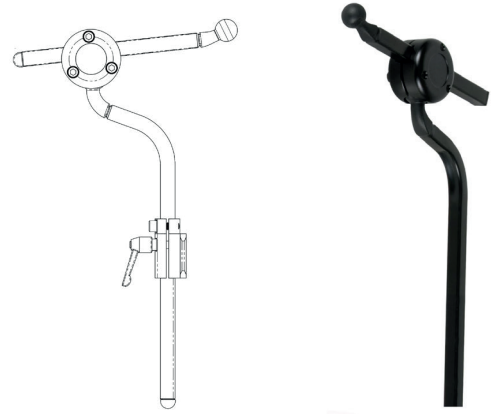

COBRA XTRA FLIP BACK -KIINNITYSJÄRJESTELMÄ

Taakse kääntyvä COBRA XTRA -kiinnitysjärjestelmä toimii yhdellä sovittimen sivulla olevalla painonapilla: tuki kääntyy sujuvasti taaksepäin pyörätuolin selkäosan taakse. COBRA XTRA on erittäin vahva ja laajasti säädettävä. Kiinnitysjärjestelmän osat ovat modulaarisia ja helposti vaihdettavissa, jolloin pää-tuki voidaan säätää tarkasti oikeaan asentoon – myös silloin, kun käyttäjän pään asento muuttuu apuvälineen määräämisen jälkeen.


TUOTE	TUOTEKOODI
COBRA XTRA Flipback -kiinnitysjärjestelmä	CBRA5010



LISÄKIINNIKKEET


Säädettävä pikakiinnike

Whitmyer-pikakiinnike liittää päätuet mihin tahansa pyörätuolin selkäosaan ilman poraamista tai iskumuttereita. Pikakiinnike kiinnitetään pyörätuolin putkiin ja se sopii 30 - 60 cm:n levyisiin pyörätuoleihin.

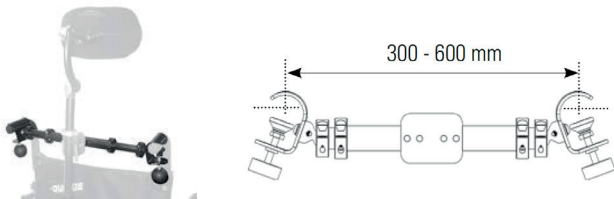


Yleiskäyttöinen kääntökiinnike

Whitmyer-irrotussovittimet kiinnittyvät yleiskäyttöiseen kääntökiinnikkeeseen. Tällöin yhdistelmä toimii kiinnityssovittimena, johon kiinnitetty tuki voidaan helposti irrottaa tai kääntää sivuun.

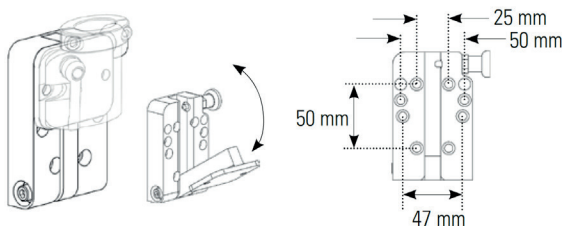


Liukukiinnike

Liukukiinnike – muovilevy, jossa on kiskot – mahdollistaa päätuen sijoittamisen paremmin sellaisille käyttäjille, joiden asento on merkittävästi epäsymmetrinen. Levy kiinnitetään pyörätuolin reikiin ja se mahdollistaa 100 mm liikettä vasemmalle tai oikealle. Kiinnike on täydellinen päätuen sijainnin parantamiseen, väärissä kohdissa oleviin iskumuttereihin kiinnittämiseen ja päätuen sijoittamiseen paremmin siihen kohdistuvien voimien suuntaisesti.

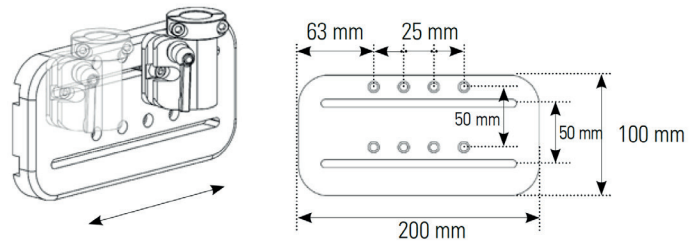

TUOTE	TUOTEKOODI
Säädettävä pikakiinnike	M7000
Universal Swing away Mount	M5000
Slide Mount	M7010

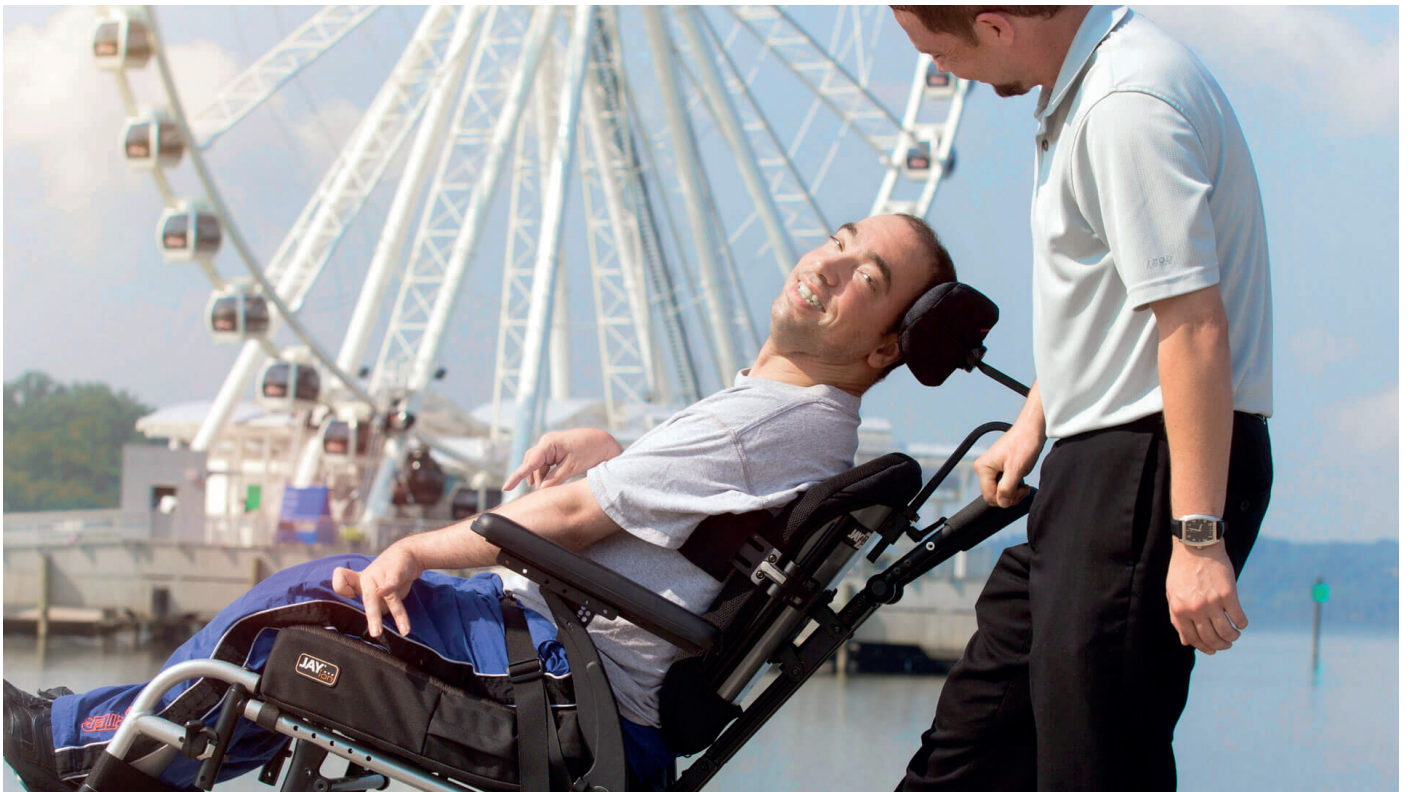

 WHITMYER®

 **SUNRISE**
MEDICAL.

Jäikö jokin asia askarruttamaan? Autamme mielellämme!
medlab.tilaukset@berner.fi | 020 690 761 | www.bernermedlab.fi

BERNER

Berner Medical on terveydenhuollon ammattilaisten luotettava kumppani. Parannamme elämänlaatua tarjoamalla ratkaisuja ihmisen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ylläpitämiseen. Palvelemme julkista ja yksityistä terveydenhuoltoa, hoivasektoria sekä ammattipuhtauteen erikoistuneita yrityksiä. Vahvuuksiamme ovat kattava tuotevalikoima, toimitusvarmuus, tuotekoulutus ja monialainen asiantuntijuus.

Tutustu meihin www.bernermedlab.fi.