

TOISTOKATETROINTIOPAS NAISILLE





TOISTOKATETROINTIOPAS NAISILLE

Hakemisto

TIETONI	4
ANATOMIA	5
MIKSI IQ CATH-KATETRI?	6
KATETRIN KÄYTTÖ : IQ2902	8
KATETRIN KÄYTTÖ : IQ2302	10
VIRTSAUS- JA NESTELISTA.....	12
IQ CATH NAISTEN KATETRIT JA KATETROINNIN APUVÄLINEET	14
MUISTIINPANOJA.....	15



Berner Medical on terveydenhuollon ammattilaisten luotettava kumppani. Parannamme elämänlaatua tarjoamalla ratkaisuja ihmisen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ylläpitämiseen. Palvelemme julkista ja yksityistä terveydenhuoltoa, hoivasektoria sekä ammattipuhtauteen erikoistuneita yrityksiä. Vahvuuksiamme ovat kattava tuotevalikoima, toimitusvarmuus, tuotekoulutus ja monialainen asiantuntijuus.

Rakko ei tyhjene, koska

.....

.....

Virtsarakko tulee tyhjentää katetroimalla kertaa vuorokaudessa

Hoitava lääkäri / uroterapeutti / sairaanhoitaja:

.....

.....

Uroterapeutin / sairaanhoitajan puh.numero:

Soittoaika:

Käytössäsi oleva IQ pisarakärikatetrin koko CH:

Katetrin tuotetunnus:


Muuta:

.....


.....

.....

.....

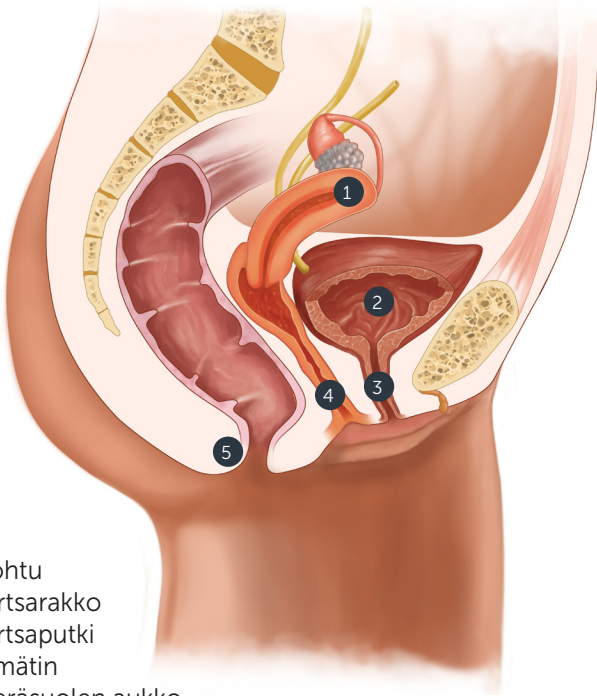

1. kohtu
2. virtsarakko
3. virtsaputki
4. emätin
5. peräsuolen aukko

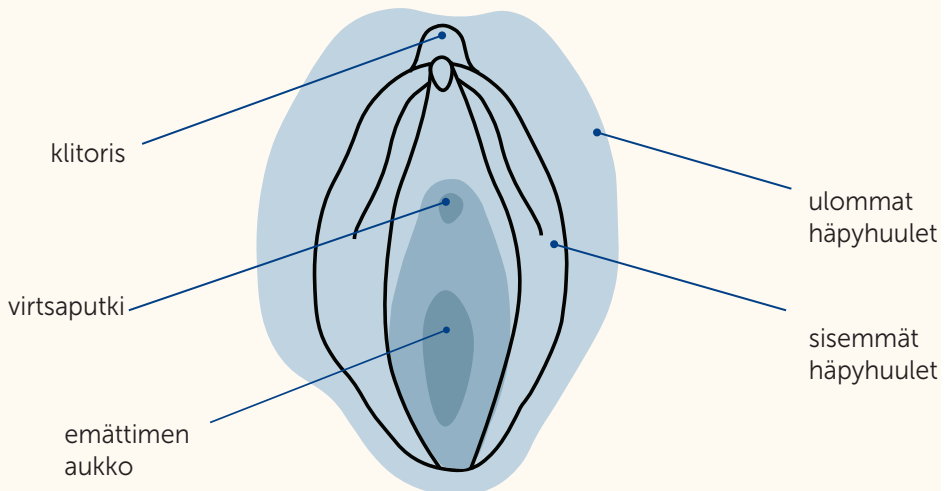


iqCATH

**Paras kärki, jonka voit koskaan saada!
Turvallinen ja varma kertakatetrointiin**




Pisarakärki

Ainutlaatuinen, patentoitu pisarakärki johtaa katetrin hellästi ja turvallisesti virtsaputken läpi.

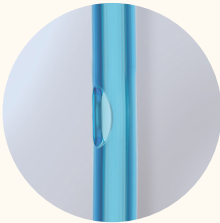

Pyöristetyt reiät


Katetrin kauttaaltaan pyöristetyt reiät estävät virtsaputken limakalvovaurioiden synnyn.

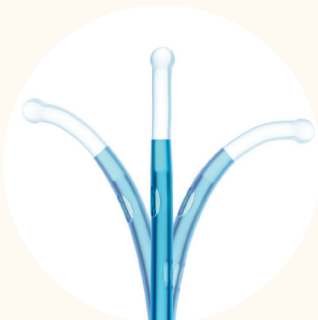


Taipuisa katetrin alkuosa

Pisarakärjen ja joustavan varren alkuosan johdosta IQ Cath kulkee kevyesti ja paine virtsaputken seinämää vasten on pieni.




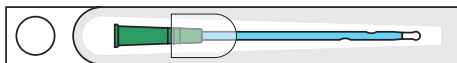

IQ2902 - Hydrofiilinen katetri ilman kostutusnestettä. Liukastamiseen käytetään 0,9 % suolaliuosta tai vettä. Päästä avattava pakkaus. Noudata aina pakkauksen mukana tulevia käyttöohjeita.

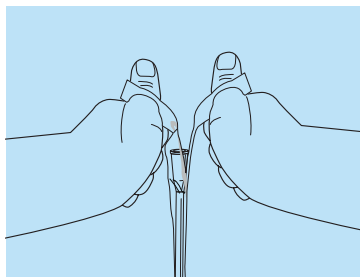


1. Avaa katetrin suojarahkaus pakkauksen päässä olevien avausrenkaiden avulla.

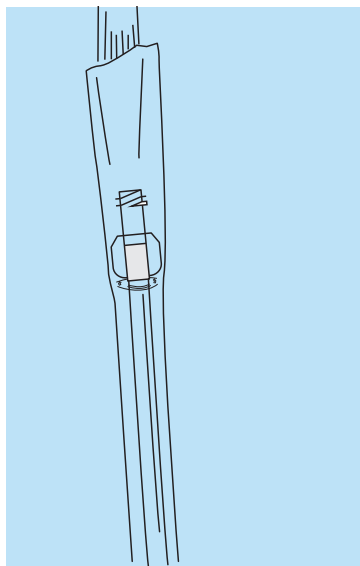


2. Täytä pakkaus vedellä, jonka jälkeen voit kiinnittää sen pakkauksessa olevan teipin avulla esim. lavuaarin reunaan.
3. Anna veden vaikuttaa 30 sekunnin ajan, jolloin katetri on valmis käytettäväksi.


4. Jos mahdollista, yritä aina ensin virtsata.

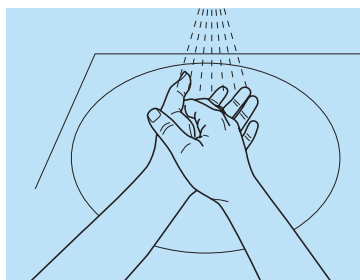


5. Pese kädet saippualla ja vedellä. Alapesu kerran vuorokaudessa on riittävä.

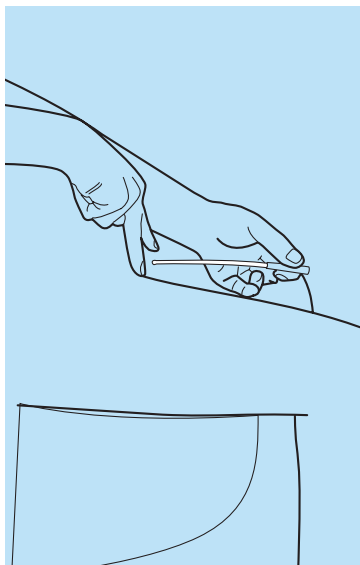


6. Levitä häpyhuulet ja vie katetri rakkoon. Apuna voit käyttää peiliä. Katetroinnin voit suorittaa istualtaan tai seisten.
7. Katetri on rakossa, kun virtsa alkaa valua ulos katetrasta. Valuta virtsa WC-pönttöön ja tyhjennä rakko.
8. Kun virtsan tulo loppuu katetrasta, vedä katetri hitaasti pois virtsaputkesta.

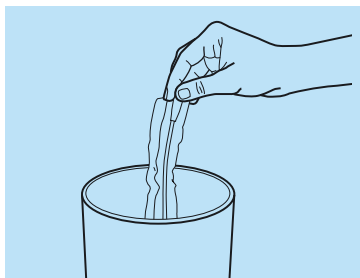


9. Hävitä katetri kotitalous-/energiajätteeseen.

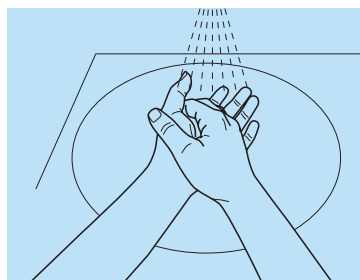


10. Pese kädet.

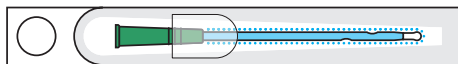


IQ2302 - Heti valmis hydrofiilinen katetri, joka on 0,9 % suolaliuoksessa. Päästä avattava pakkaus. Noudata aina pakkauksen mukana tulevia käyttöohjeita.

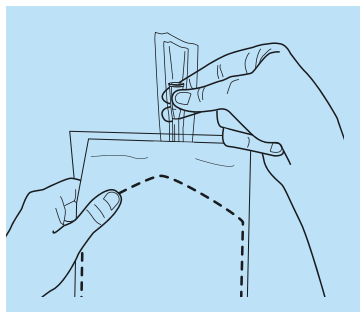

1. Avaa foliopakkaus. Varmista, että neste peittää tasaisesti koko katetrin pinnan. Katetri on heti valmis käytettäväksi.

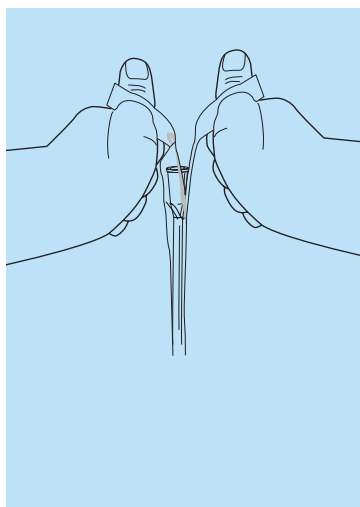


2. Avaa katetrin suojapakkaus pakkauksen päässä olevien avausrenkaiden avulla.
3. Voit halutessasi kiinnittää katetripakkauksen teipin avulla esim. lavuaarin reunaan.
4. Jos mahdollista, yritä aina ensin virtsata.

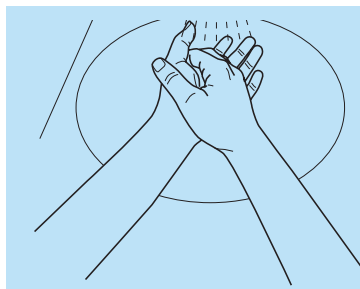


5. Pese kädet ja suorita alapesu. Alapesu kerran vuorokaudessa on riittävä.


HUOM! IQ2302.XX-katetrit on pakattu erilliseen folioon 10 kpl erissä. Katetrien käyttöaika folion avaamisen jälkeen on 30 päivää pakkauksessa olevan nesteen kuivumisen välttämiseksi. Ennen käyttöä pitää varmistaa, että katetripakkauksessa on riittävä määrä nestettä.

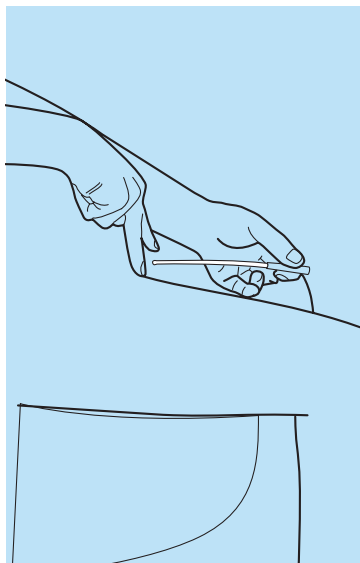

6. Levitä häpyhuulet ja vie katetri rakkoon. Apuna voit käyttää peiliä. Katetroinnin voit suorittaa istualtaan tai seisten.
7. Työnnä katetri hitaasti virtsaputkeen. Katetri on rakossa, kun virtsa alkaa valua ulos katetrasta. Valuta virtsa WC-pönttöön ja tyhjennä rakko.
8. Kun virtsan tulo loppuu katetrasta, vedä katetri hitaasti pois virtsaputkesta.

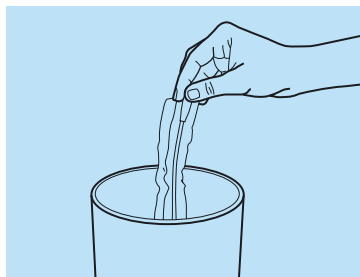

9. Hävitä katetri kotitalous/energiajätteeseen.

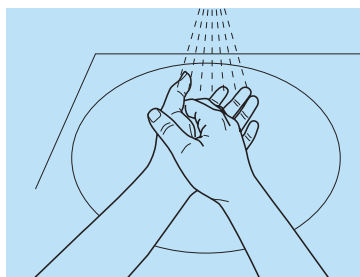

10. Pese kädet.

VIRTSAUS- JA NESTELISTA


Päivämäärä ja kellonaika	Nautittu nestemäärä (dl)	Katetroitu virtsan määrä (ml)	Spontaani virtsaus (+ / -)

IQ CATH -KATETRIT	CH 10	CH 12	CH 14
IQ2902 Hydrofiilinen katetri ilman kostutusnestettä	2902.10	2902.12	2902.14
IQ2302 Heti valmis hydrofiilinen katetri, joka on 0,9 % keittosuolaliuoksessa	2302.10	2302.12	2302.14

Pakkauskoko 30 kpl/ltk. Naisten katetrin kokonaispituus on 17 cm.

Katetroinnin apuvälineet

110.02 Iso polvienlevittäjätyyny, leveys 30 cm

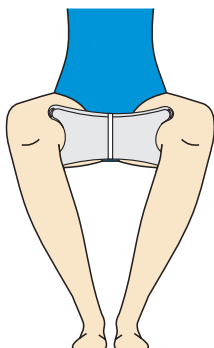

Tyyny on puhallettava. Se on kätevä kuljettaa tyhjänä ja puhaltaa täyteen tarvittaessa. Tyynyä voi käyttää myös suihkussa.

[illegible]



HUOMISEN PUOLUSTAJA

Yli 100 vuoden
kokemuksella

Berner Oy

www.bernermedlab.fi

medlab@berner.fi

020 791 00 (vaihde)